

Saljol Adapterset Sitzerrhöhung und Sitzwinkleinstellung für Duschhocker & Duschstuhl



Bedienungsanleitung

Hersteller: Saljol GmbH
Produkt: Adapterset Sitzerrhöhung und Sitzwinkleinstellung
Typ: Zubehör
Artikelnummer: 4058789017050

Hersteller: Saljol GmbH, Frauenstraße 32, 82216 Maisach
Telefon: +49 8141 317740, Fax: +49 8141 3177411
Mail: hallo@saljol.de, Web: www.saljol.de

Lieferumfang

4 Adapterrohre, Höhe 4 cm	1 Bedienungsanleitung
4 Adapterrohre, Höhe 8 cm	
4 M6 Zylinderkopfschrauben	Benötigtes Werkzeug:
4 M6 Muttern	Inbusschlüssel 5 mm,
4 gebogene Unterlegscheiben	Maulschlüssel 10 mm



Gebrauchsbeschränkungen

Das maximale zulässige Nutzergewicht beträgt 150 kg.




Unfallvermeidung

- Achten Sie bei der Montage auf mögliche Quetschstellen.
- Die Adapterrohre dürfen nur an den dafür vorgesehenen Befestigungspunkten des Duschhockers bzw. des Duschstuhls montiert werden.
- Das Adapterset darf ausschließlich an Duschhockern und Duschstühlen von Saljol verwendet werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Adapterrohre, Schrauben, und Unterlegscheiben.
- Ziehen Sie alle Schrauben gleichmäßig und fest an.
- Vor jeder Benutzung korrekten Sitz der Adapterrohre und festen Sitz aller Schrauben prüfen.

Montage

1. Sitzfläche demontieren

- Schieben Sie die beiden Sitzflächen nacheinander gleichmäßig in Pfeilrichtung nach innen, bis sie sich aus den Aufnahmen lösen.
- Nehmen Sie die Sitzflächen vollständig vom Rahmen ab.

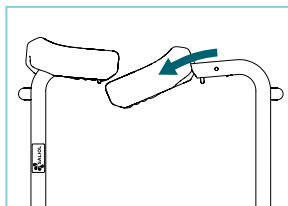



2. Adapterrohre montieren

Wählen Sie zunächst die gewünschte Sitzhöhe bzw. Sitzwinkleinstellung und Sitzbreite:

- Sitzerhöhung um 4 cm: Montieren Sie vier Adapterrohre mit einer Länge von jeweils 4 cm.
- Sitzerhöhung um 8 cm: Montieren Sie vier Adapterrohre mit einer Länge von jeweils 8 cm.
- Sitzwinkel von 13°: Montieren Sie entweder zwei 4-cm-Adapterrohre an den hinteren Befestigungspunkten oder zwei 4-cm-Adapterrohre vorne und zwei 8-cm-Adapterrohre hinten (vorne zeigt die Seite mit dem offenen Rahmen, hinten mit dem geschlossenen Rahmen).
- Sitzbreite 36 cm: Montieren Sie vier Adapterrohre an den vier vorgesehenen Befestigungspunkten **1**
- Sitzbreite 39 cm: Montieren Sie vier Adapterrohre an den vier vorgesehenen Befestigungspunkten **2**
- Sitzbreite 42 cm: Montieren Sie vier Adapterrohre an den vier vorgesehenen Befestigungspunkten **3**




- Positionieren Sie die ausgewählten Adapterrohre an den vorgesehenen Befestigungspunkten 1/2/3 an dem Rahmen.
- Richten Sie die Bohrungen der Adapterrohre mit den Bohrungen des Rahmens aus.
- Führen Sie die mitgelieferten M6-Zylinderkopfschrauben zusammen mit den gebogenen Unterlegscheiben durch die Bohrungen.
- Setzen Sie die Muttern auf die Schrauben.
- Ziehen Sie alle montierten Schraubverbindungen mit geeignetem Werkzeug gleichmäßig fest.
- Prüfen Sie anschließend den festen Sitz der Adapterrohre.

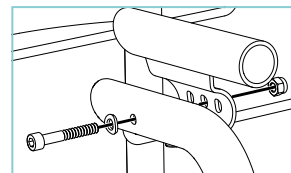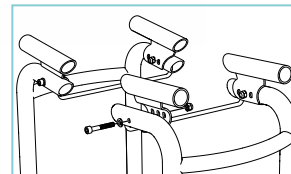

3. Sitzfläche montieren

- Positionieren Sie die Sitzflächen schräg über den Aufnahmen des Rahmens.
- Führen Sie die Sitzfläche in Pfeilrichtung nach außen auf den Rahmen.
- Drücken Sie die Sitzfläche vollständig in die Aufnahmen.
- Prüfen Sie anschließend den sicheren und festen Sitz der Sitzfläche.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass alle Schraubverbindungen fest angezogen sind und die Sitzfläche des Duschhockers bzw. Duschstuhls sicher und stabil steht.

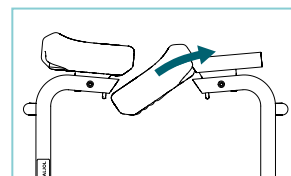

Hinweis

Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an, um Beschädigungen am Material zu vermeiden.

Technische Daten

Sitzhöhereinstellung	54 cm/58 cm
Sitzwinkleinstellung	13°
Hygieneöffnung, Stufe 1/2/3	6/9/12 cm
Sitzbreite 1/2/3	36/39/42 cm

Reinigung und Desinfektion



Wichtig

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie z. B. Lösungs- oder Scheuermittel sowie keine harten Bürsten.
- Reinigen Sie den Duschhocker/Duschstuhl nicht mit einem Hochdruck- oder Dampfreiniger.
- Beachten Sie bei der Desinfektion die Nutzungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers der Reinigungs- und Desinfektionsmittel.
- Spülen Sie den Duschhocker/Duschstuhl nach der Reinigung mit klarem, warmem Wasser ab und trocknen Sie ihn sorgfältig.
- Entfernen Sie Rückstände von Körperpflegemitteln wie Flüssigseife oder Duschgel nach der Benutzung gründlich mit klarem, warmem Wasser.

Formales zur Bedienungsanleitung; Version/Revision: 2026.01

Erstelldatum: 23.09.2026

Informationen entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. Technische Zeichnungen und Fotos können von der Realität abweichen. ©2026 Saljol GmbH: alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Firma Saljol GmbH gestattet.

Saljol Adapter Set for Seat Height Increase and Seat Angle Adjustment for Shower Stool & Shower Chair

Instruction manual

Manufacturer: Saljol GmbH
Product: Saljol Adapter Set for Seat Height Increase and Seat Angle Adjustment
Type: Accessories
Article number: 4058789017050

Manufacturer: Saljol GmbH, Frauenstraße 32, 82216 Maisach
Phone: +49 8141 317740, Fax: +49 8141 3177411
Mail: hallo@saljol.de, Web: www.saljol.de/en

Scope of delivery

4 adapter tubes, height 4 cm	1 Instruction manual
4 adapter tubes, height 8 cm	
4 M6 socket head cap screws	Required tools:
4 M6 nuts	5 mm Hex key
4 curved washers	10 mm open-ended spanner



Restrictions on use

The maximum permitted user weight is 150 kg.




Accident prevention

- Be aware of potential pinch points during assembly.
- The adapter tubes may only be fitted to the designated mounting points on the shower stool or shower chair.
- The adapter set may only be used with Saljol shower stools and shower chairs.
- Only use the adapter tubes, screws and washers supplied.
- Tighten all screws evenly and securely.
- Before each use, check that the adapter tubes are correctly positioned and that all screws are securely tightened.

Assembly

1. Remove the seat

- Slide the two seat sections one after the other evenly inwards in the direction of the arrow until they disengage from the mounts.
- Remove the seat sections completely from the frame.

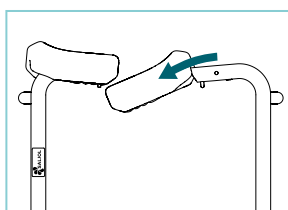



2. Fit the adapter tubes

First select the required seat height or seat angle adjustment and seat width:

- Increase seat height by 4 cm: Fit four adapter tubes, each 4 cm long.
- Increase seat height by 8 cm: Fit four adapter tubes, each 8 cm long.
- Seat angle of 13°: Fit either two 4 cm adapter tubes to the rear mounting points or two 4 cm adapter tubes at the front and two 8 cm adapter tubes at the rear (the side with the open frame is the front; the side with the closed frame is the rear).
- Seat width 36 cm: Fit four adapter tubes to the four designated mounting points **1**.
- Seat width 39 cm: Fit four adapter tubes to the four designated mounting points **2**.
- Seat width 42 cm: Fit four adapter tubes to the four designated mounting points **3**.




- Position the selected adapter tubes at the designated mounting points 1/2/3 on the frame.
- Align the holes in the adapter tubes with the holes in the frame.
- Insert the supplied M6 socket head cap screws together with the curved washers through the holes.
- Fit the nuts onto the screws.
- Tighten all fitted screw connections evenly using suitable tools.
- Then check that the adapter tubes are securely fitted.

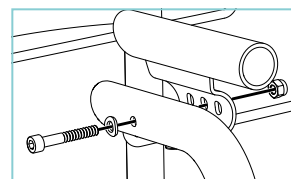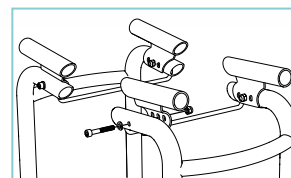

3. Fit the seat

- Position the seat sections at an angle above the mounts on the frame.
- Slide the seat sections outwards onto the frame in the direction of the arrow.
- Press the seat sections fully into the mounts.
- Then check that the seat is securely and firmly fitted.
- Before use, ensure that all screw connections are securely tightened and that the seat of the shower stool or shower chair is secure and stable.

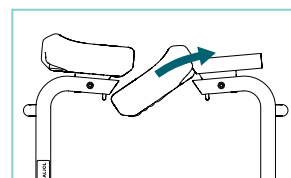

Note

Tighten the screws only hand-tight to avoid damaging the material.

Technical Data

Seat height adjustment	54 cm/58 cm
Seat angle adjustment	13°
Hygiene opening, setting 1/2/3	6/9/12 cm
Seat width 1/2/3	36/39/42 cm

Cleaning and Disinfection



Important

- Do not use aggressive cleaning agents such as solvents or abrasive cleaners, or hard brushes.
- Do not clean the shower stool/shower chair using a high-pressure cleaner or steam cleaner.
- When disinfecting, follow the instructions for use and application provided by the manufacturer of the cleaning and disinfecting agents.
- After cleaning, rinse the shower stool/shower chair with clean, warm water and dry it thoroughly.
- After use, thoroughly remove residues of personal care products such as liquid soap or shower gel with clean, warm water

Formalities of the Instruction Manual

Version/revision: 2026.01

Creation date: 23/09/2026

Information was current at the time of going to press. We reserve the right to make technical changes. Technical drawings and photos may differ from reality.

©2026 Saljol GmbH: all rights reserved. Reprinting, including extracts, is only permitted with the authorisation of Saljol GmbH.