

Saljol Rückenlehne für Duschhocker

Bedienungsanleitung

Hersteller: Saljol GmbH
Produkt: Rückenlehne
Typ: Zubehör
Artikelnummer: 4058789017043

Hersteller:
Saljol GmbH, Frauenstraße 32, 82216 Maisach
Telefon: +49 8141 317740, Fax: +49 8141 3177411
Mail: hallo@saljol.de, Web: www.saljol.de



Abbildung:
Duschhocker mit
Rückenlehne



Lieferumfang

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1 Rückenlehne | 4 Distanzhülsen |
| 2 EPP Rückenelemente | 1 Bedienungsanleitung |
| 4 M6 Linsenkopfschrauben | 1 Inbusschlüssel 5 mm |
| 4 gebogene Unterlegscheiben | |



Gebrauchsbeschränkungen

Das maximale zulässige Nutzergewicht beträgt 150 kg.




Unfallvermeidung

- Achten Sie bei der Montage auf mögliche Quetschstellen.
- Eine nicht ordnungsgemäß montierte oder lockere Rückenlehne kann zum Verlust des Gleichgewichts und zu Stürzen führen. Prüfen Sie vor jeder Benutzung den festen Sitz und den ordnungsgemäßen Zustand der Rückenlehne. Ziehen Sie gegebenenfalls die Schrauben nach und stellen Sie die EPP-Rückenelemente korrekt ein.
- Die Rückenlehne darf nur an den dafür vorgesehenen Befestigungspunkten des Duschhockers montiert werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Schrauben, Unterlegscheiben und Distanzhülsen.
- Ziehen Sie alle Schrauben gleichmäßig und fest an.
- Die Rückenlehne dient nur zur Unterstützung beim Sitzen. Sie darf nicht als Aufsteh- oder Stützhilfe verwendet werden.
- Lehnen Sie sich nicht ruckartig oder mit übermäßiger Kraft gegen die Rückenlehne.
- Die Einwirkung äußerer Wärme- oder Kältequellen, beispielsweise direkte Sonneneinstrahlung oder niedrige Umgebungstemperaturen, kann die Oberflächentemperatur der Rückenlehne verändern. Prüfen Sie diese vor der Benutzung.

Montage

- Positionieren Sie die Rückenlehne an den vorgesehenen Befestigungspunkten auf der Unterseite des Duschhockerrahmens.
- Richten Sie die Bohrungen der Rückenlehne mit den Bohrungen des Rahmens aus.
- Führen Sie die mitgelieferten Schrauben mit den gebogenen Unterlegscheiben durch die Bohrungen der Rückenlehne und stecken Sie anschließend die Distanzhülsen auf die Schrauben.

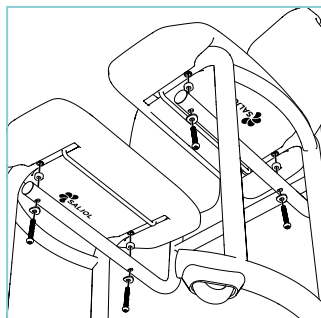


- Ziehen Sie die Schrauben mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel gleichmäßig handfest an.
- Prüfen Sie anschließend den sicheren und festen Sitz der Rückenlehne.



Hinweis

Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an, um Beschädigungen am Material zu vermeiden.

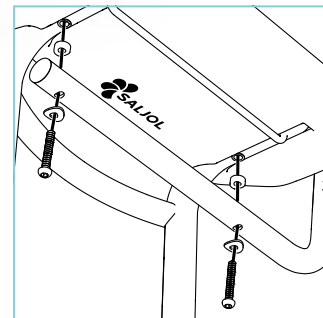

Technische Daten

Empfohlen für Größe	150–190 cm
Maximales Nutzergewicht	150 kg
Gesamt Gewicht	1,5 kg
Länge Rückenlehne	37 cm
Breite Rückenlehne	33/36/39 cm

Reinigung und Desinfektion



Wichtig

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie z. B. Lösungs- oder Scheuermittel sowie keine harten Bürsten.
- Reinigen Sie Rückenlehne und Duschhocker nicht mit einem Hochdruck- oder Dampfreiniger.
- Beachten Sie bei der Desinfektion die Nutzungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers der Reinigungs- und Desinfektionsmittel.
- Spülen Sie den Duschhocker nach der Reinigung mit klarem, warmem Wasser ab und trocknen Sie ihn sorgfältig, um die Lebensdauer zu erhöhen.
- Entfernen Sie Rückstände von Körperpflegemitteln wie Flüssigseife, Shampoo oder Duschgel nach der Benutzung gründlich mit klarem, warmem Wasser.

Formales zur Bedienungsanleitung

Version/Revision: 2026.01

Erstelldatum: 28.08.2026

Informationen entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. Technische Zeichnungen und Fotos können von der Realität abweichen.

©2026 Saljol GmbH: alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Firma Saljol GmbH gestattet.

Saljol Backrest for Shower Stool



Instruction manual

Manufacturer: Saljol GmbH
Product: Backrest
Type: Accessories
Article number: 4058789017043

Manufacturer:
Saljol GmbH, Frauenstraße 32, 82216 Maisach
Phone: +49 8141 317740, Fax: +49 8141 3177411
Mail: hallo@saljol.de, Web: www.saljol.de/en



Figure:
Shower stool
with backrest



Scope of delivery

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1 backrest | 4 spacer sleeves |
| 2 EPP backrest elements | 1 instruction manual |
| 4 M6 pan head screws | 1 5 mm hex key |
| 4 curved washers | |



Restrictions on use

The maximum permitted user weight is 150 kg.




Accident prevention

- Be aware of potential pinch points during assembly.
- An incorrectly fitted or loose backrest may cause loss of balance and falls. Before each use, check that the backrest is securely fitted and in proper condition. If necessary, retighten the screws and correctly adjust the EPP backrest elements.
- The backrest may only be fitted to the designated fixing points on the shower stool.
- Use only the supplied screws, washers and spacer sleeves.
- Tighten all screws evenly and securely.
- The backrest is intended solely to provide support while seated. It must not be used as an aid for standing up or as a support aid.
- Do not lean against the backrest suddenly or with excessive force.
- Exposure to external sources of heat or cold, such as direct sunlight or low ambient temperatures, may alter the surface temperature of the backrest. Check the surface temperature before use.

Assembly

- Position the backrest at the designated fixing points on the underside of the shower stool frame.
- Align the holes in the backrest with the holes in the frame.
- Insert the supplied screws together with the curved washers through the holes in the backrest, then place the spacer sleeves onto the screws.

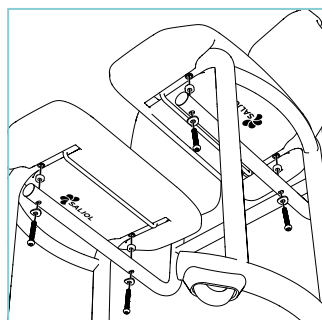


- Using the supplied hex key, tighten the screws evenly until hand-tight.
- Then check that the backrest is securely and firmly fitted.



Note

Tighten the screws by hand only to prevent damage to the material.

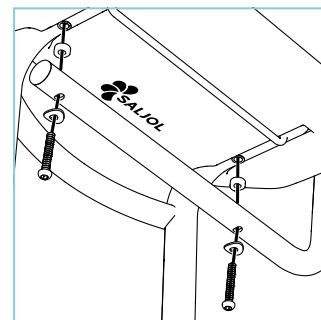

Technical data

Recommended user height	150–190 cm
Maximum user weight	150 kg
Total weight	1,5 kg
Backrest length	37 cm
Backrest width	33/36/39 cm

Cleaning and disinfection



Important

- Do not use aggressive cleaning agents, such as solvents or abrasive cleaners, and do not use hard brushes.
- Do not clean the backrest or shower stool using a high-pressure cleaner or steam cleaner.
- When disinfecting, observe the instructions for use and processing provided by the manufacturer of the cleaning and disinfecting agents.
- After cleaning, rinse the shower stool with clean, warm water and dry it thoroughly to extend its service life.
- After use, thoroughly remove residues of personal care products, such as liquid soap, shampoo or shower gel, using clean, warm water.

Formalities of the Instruction Manual

Version/revision: 2026.01

Creation date: 28/08/2026

Information was current at the time of going to press. We reserve the right to make technical changes. Technical drawings and photos may differ from reality.

©2026 Saljol GmbH: all rights reserved. Reprinting, including extracts, is only permitted with the authorisation of Saljol GmbH.

EN