


Saljol Carbon Rollator

Gebruiksaanwijzing | Instruction manual

NL

EN

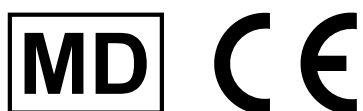

www.saljol.de/en/



Voorwoord

Bedankt voor het aanschaffen van een Saljol Carbon Rollator! Met uw nieuwe rollator kunt u in stijl een mobiel en zelfbepaald leven leiden. De Saljol Carbon Rollator is ontwikkeld met veiligheid in het achterhoofd en zal u ondersteunen in uw dagelijks leven.

Lees de gebruiksaanwijzing en de productgids zorgvuldig door voordat u uw rollator voor het eerst gebruikt. Ze bevatten belangrijke veiligheidsinstructies, nuttige tips voor gebruik en verzorging en een lijst met aanbevolen accessoires.



Inhoud

1.	Identificatie.....	4
2.	Algemene informatie.....	4
3.	Opmerkingen.....	6
3.1	Veiligheidsinstructies.....	6
3.2	Opmerkingen over het veilige gebruik van het product.....	6
4.	Leveringsomvang en productoverzicht.....	7
4.1	Omvang van de levering.....	7
4.2	Markering/label.....	8
4.3	Productoverzicht.....	9
5.	Gebruik.....	10
5.1	Uitklappen van de rollator.....	10
5.2	De rollator inklappen.....	11
5.3	De juiste handgreephoogte/steunhoogte instellen.....	11
5.4	Gebruik van de remmen.....	12
5.5	De parkeerrem gebruiken.....	12
5.6	Rem afstellen.....	13
5.7	De drempelhulp gebruiken.....	13
5.8	De sleeprem gebruiken.....	14
6.	Onderhoud en hergebruik.....	14
6.1	Onderhoud.....	14
6.2	Onderhoudsschema.....	14
6.2.1	Dagelijkse visuele inspectie.....	14
6.2.2	Functietests.....	15
6.2.3	Schoonmaken.....	15
6.2.4	Desinfectie.....	17
6.3	Hergebruik.....	17
7.	Transportbeschrijving.....	17
8.	Opslag en verzending.....	17
9.	Afvalverwijdering.....	17
10.	Technische gegevens en materiaallijst.....	18
10.1	Technische gegevens.....	18
10.2	Gebruikte materialen.....	18
11.	Garantie.....	19
12.	Opmerking over de verplichting om incidenten te melden.....	20
13.	Accessoires.....	20
14.	Testrapport voor hergebruik.....	22

1. Identificatie

Fabrikant: Saljol GmbH
 Product: Carbon Rollator
 Type: Lichtgewicht rollator
 Artikelomschrijving: Carbon Rollator
 Versie: 2025

Fabrikant: Saljol GmbH
 Frauenstraße 32, 82216 Maisach
 Telefoon: +49 (0)8141 317740
 Fax: +49 (0)8141 3177411
 Mail: hallo@saljol.de
 Web: www.saljol.de

Formele informatie over de gebruiksaanwijzing

Versie/revisie: 2025.02

Oprichtingsdatum: 07.08.2025

Informatie komt overeen met de status op het moment van afdrukken. Technische wijzigingen voorbehouden. Technische tekeningen en foto's kunnen afwijken van de werkelijkheid.

©2025 Saljol GmbH: alle rechten voorbehouden. Herdruk, ook in uittreksels, is alleen toegestaan met toestemming van Saljol GmbH.

2. Algemene informatie

Doel

De Saljol Carbon Rollator is ontwikkeld voor gebruik binnen en buiten en is alleen geschikt voor gebruik op stevige en vlakke ondergronden.

Met behulp van de Saljol Carbon Rollator kunnen mensen weer staan en lopen en kan de gebruiker rusten op de geïntegreerde zitting. Gebruikers kunnen dagelijkse routinetaken uitvoeren met de Saljol Carbon Rollator zonder afhankelijk te zijn van hulp van anderen.

Toepassingen: De Saljol Carbon Rollator is ontworpen een breed scala aan gezondheidsproblemen. Hij is speciaal ontwikkeld voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben bij het lopen.

Indicatie

De Saljol Carbon Rollator is uitsluitend ontworpen voor gebruik als loophulpmiddel en is met name geschikt voor patiënten met beperkte mobiliteit als gevolg van lichamelijke beperkingen, beperkingen in actieve of passieve mobiliteit of voor mensen die niet kunnen lopen. Bewegingsapparaat en ziekten zoals artritis, osteoporose, spierzwakte, beroerte of de ziekte van Parkinson.

Contra-indicatie

De Saljol Carbon Rollator is niet geschikt voor mensen met zeer zwakke armkracht, aanzienlijke cognitieve stoornissen of een zeer slecht evenwicht. Het gebruik en de mogelijke toepassingen van de Saljol Carbon Rollator moeten worden beoordeeld en geïnstrueerd door een arts of therapeut.

Gebruiksduur

Als de Carbon rollator wordt gebruikt zoals bedoeld, met regelmatige verzorging en onderhoud door een gespecialiseerd bedrijf en in overeenstemming met de veiligheidsinstructies, kan verwacht worden dat de rollator tot 4 jaar meegaat. Als de rollator na 4 jaar nog steeds in goede staat is, kan deze gebruikt blijven.

Verantwoordelijkheid

Als fabrikant kunnen wij ons alleen verantwoordelijk stellen voor de veiligheid, betrouwbaarheid en geschiktheid voor gebruik van de rollator als aanpassingen, uitbreidingen, reparaties en onderhoudswerkzaamheden regelmatig en alleen door bevoegd vakpersoneel worden uitgevoerd en de rollator op de juiste manier wordt gebruikt volgens alle gebruiksinstructies.

Conformiteitsverklaring

CE Als fabrikant van het product verklaart Saljol dat de Carbon Rollator volledig voldoet aan de vereisten van de Verordening betreffende medische hulpmiddelen (2017/745) (vanaf 2022). Een gedetailleerde CEconformiteitsverklaring te vinden op onze homepage op www.saljol.de.

De fabrikant/gemachtigde verklaart dat de volgende producten met de productaanduiding Carbon Rollator, versie: 2025

Saljol Carbon Rollator CR62	British Racing Green	4058789013960
Saljol Carbon Rollator CR62	Midnight Blue	4058789013977
Saljol Carbon Rollator CR62	Matt Black	4058789013991
Saljol Carbon Rollator CR62	Copper Red	4058789014714
Saljol Carbon Rollator CR62	Pure Gold	4058789014738
Saljol Carbon Rollator CR54	British Racing Green	4058789014004
Saljol Carbon Rollator CR54	Midnight Blue	4058789014011
Saljol Carbon Rollator CR54	Matt Black	4058789014035
Saljol Carbon Rollator CR54	Copper Red	4058789014721
Saljol Carbon Rollator CR54	Pure Gold	4058789014745
Saljol Carbon Rollator CR62W	British Racing Green	4058789015766

voldoen aan de volgende geharmoniseerde normen:

EN ISO 11199-2:2021 – Loophulpmiddelen voor tweehandig gebruik - Eisen en beproevingsmethoden – Deel 2: Rollators; zitting en handgrepen voldoen aan biologische beoordeling ISO 10993-5:2009-10

3. Opmerkingen

3.1 Veiligheidsinstructies

In de bedieningsinstructies worden veiligheidsinstructies gebruikt die op twee manieren te herkennen zijn: door een symbool en door een signaalwoord. Het symbool informeert je over het soort waarschuwing. Het signaalwoord geeft meer details, bijvoorbeeld de ernst van een dreigend risico.



Let op/belangrijk

Mogelijk gevaarlijke situatie (kleine verwondingen of schade aan eigendommen), verplichting tot speciaal gedrag of speciale activiteit voor veilig gebruik van de rollator



Tip

Tips voor het gebruik en bij zonder nuttige informatie

3.2 Opmerkingen over het veilige gebruik van het product

Houd rekening met het volgende voor een veilig gebruik van het product:



Beperkingen van het gebruik

- Het maximale gebruikersgewicht voor de CR54 en CR62 mag niet hoger zijn dan 150 kg. Het maximale gebruikersgewicht voor de CR62W mag niet hoger zijn dan 180 kg.
- De tas mag met maximaal 5 kg worden beladen.
- Het is niet toegestaan om uzelf met uw voeten te verplaatsen terwijl u zit en trippelt met de rollator.
- De rollator is ontwikkeld voor gebruik zowel binnen als buiten.
- Nooit gebruiken in de aanwezigheid van ontvlambare/brandbare en brandbare materialen.



Let op!

Vingers of andere lichaamsdelen van de gebruiker en/of derden kunnen bekneld bij het opvouwen van de rollator of het verstellen van de steunhoogte. Wees daarom uiterst oplettend en voorzichtig bij het verstellen van het apparaat. Let op de openingen tussen de rollatoronderdelen om uzelf te beschermen tegen beknelling van vingers en andere lichaamsdelen.



Voorkomen van ongelukken

- Verwijder alle kurkgekleurde labels voordat u de rollator gebruikt.
- Gebruik de rollator alleen voor het aangegeven doel.
- Gebruik de rollator alleen als deze in perfecte technische staat is.
- Het is verboden om wijzigingen aan het ontwerp van de rollator aan te brengen zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant Saljol.
- Zorg ervoor dat u tijdens het afstellen van de rollator niet met uw vingers of andere lichaamsdelen knelt aan de bewegende onderdelen.
- Zorg er altijd voor dat de rugband volledig in de houder zit.
- Zorg ervoor dat beide parkeerremmen geactiveerd zijn wanneer je gaat zitten.
- Alle vier de wielen moeten te allen tijde in contact zijn met de grond. Dit is de enige manier om de rollator veilig te balanceren en ongelukken te voorkomen.
- Houd er rekening mee dat de rolsnelheid van de Saljol Carbon Rollator hoger kan zijn dan uw loopsnelheid op hellend terrein. Er is een verhoogd risico op vallen. Let op het gebruik van de sleeprem.
- altijd voorzichtig bij het oversteken van dwarsliggers, spoorrails, putdeksels met brede sleuven en dergelijke. Een fiets kan vast komen te zitten, abrupt stoppen en een val veroorzaken.
- Zorg ervoor dat je voorzichtig loopt op ijzige oppervlakken en kleine obstakels zoals takken, zodat je snel kunt reageren.
- Gebruik altijd beide parkeerremmen wanneer je de Saljol Carbon Rollator stopt of parkeert.

4. Leveringsomvang en productoverzicht

4.1 Omvang van de levering

De uitrusting van onze producten kan afhankelijk van het land en de variant om te voldoen aan de lokale vereisten. De leveringsomvang kan daarom variëren.

1x Saljol Carbon Rollator	1x bel* (gemonteerd)
1x tas (gemonteerd)	1x reinigingsdoekje*
1x rugband*	1x producthandleiding*
1x paalhouder (gemonteerd)	1x gebruiksaanwijzing
1x LED-licht* (gemonteerd)	

*Afhankelijk van de variant, niet inbegrepen bij de levering.



Belangrijk

Instructies voor het gebruik van de rugband, bel en LED-lamp zijn te vinden in de meegeleverde gebruiksaanwijzing.

4.2 Markering/label

Het productlabel is bevestigd aan de binnenkant van het linker framegedeelte. Het bevat belangrijke informatie over het product: EAN-code, productnaam, productiedatum, productkleur en -gewicht, productafmetingen, maximaal gebruikersgewicht, maximaal gewicht van de tas, zithoogte, informatie van de fabrikant over Saljol en het serienummer. Het label mag niet worden verwijderd.

De volgende symbolen zijn te vinden op het etiket van de Carbon Rollator en op de verpakking, soms in combinatie met andere informatie, en geven belangrijke kenmerken aan.

- REF

Bestelnummer / artikelnummer
- Productiedatum
- Kleur en totaalgewicht
- L/W/H

in cm

Lengte/breedte/hoogte van de rollator in cm
- Maximaal gebruikersgewicht
- Maximaal laadgewicht van de tas
- Zithoogte
- Gebruiksaanwijzing in acht nemen
- MD


Medische hulp
- CE

CE-markering
- Product geschikt voor binnen en buiten
- Productfabrikant
- SN

Serienummer

Carbon Rollator	
	2021-01-01
	Green
L/W/H in cm	67/61/81-103
	150 kg
	5 kg
	62 cm
	MD
	CE
SALJOL GmbH Frauenstraße 32 82216 Maisach Germany	
SN	
1234567890123456	

4.3 Productoverzicht

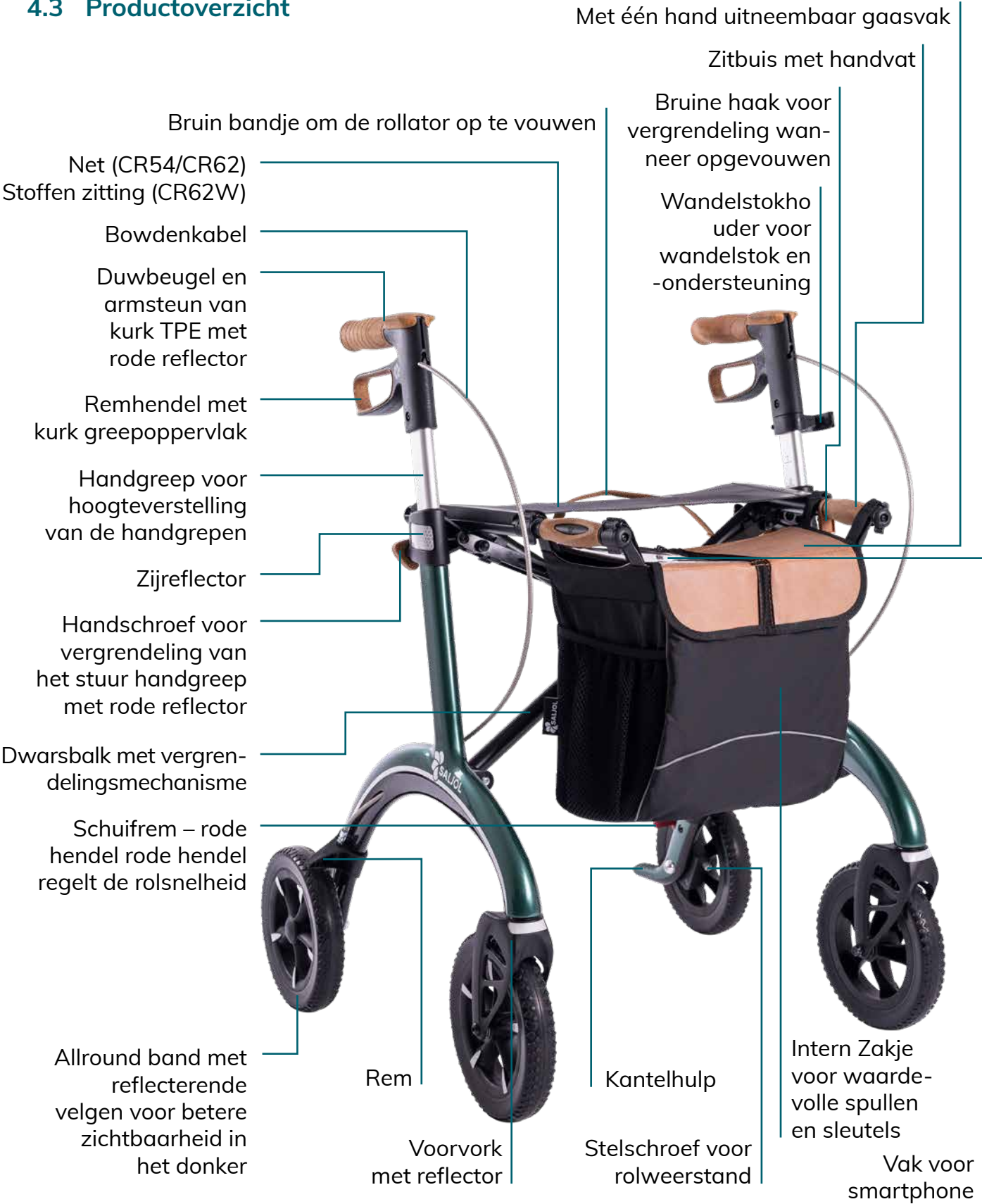

Afbeelding 1: De Saljol Carbon Rollator (rugband, bel en LED-lampje niet afgebeeld)

5. Gebruik

Inventarisatie

Haal de Saljol Carbon Rollator uit de doos en controleer of er iets ontbreekt. Vergelijk met Figuur 1 op pagina 9 en met de leveringsomvang, die beschreven staat onder 4.1 op pagina 7. Als er een onderdeel ontbreekt of onderdelen beschadigd zijn, neem dan direct contact op met uw dealer of Saljol.

5.1 Uitklappen van de rollator



Open de bruine haak om de vouw los te maken.



Houd beide vast en duw of trek ze parallel uit elkaar.



Druk ten slotte beide zitbuizen met je handen naar beneden tot een „Er is een klikgeluid te horen.



Belangrijk

Test nu of u de zitbuizen omhoog kunt trekken. Als dit niet lukt, is de rollator correct en veilig uitgekapt. Vergelijk bij twijfel met Figuur 1 op pagina 9.

Controleer na het uitklappen of de rollator goed vergrendeld is door het vergrendelingsmechanisme hoorbaar in te drukken en of de zitting goed gespannen is. Zorg ervoor dat beide duwhandvatten stevig in het frame zijn geplaatst en stevig zijn vastgezet met de handschroef.

Test altijd of alle accessoires goed passen VOORDAT u ze gebruikt. Het niet in acht nemen van deze waarschuwingen kan leiden tot letsel.

5.2 De rollator inklappen



Trek de bruine ontgrendelingsband op de zitting met een lichte ruk omhoog om de rollator op te vouwen.



Duw de rollator bij de handvatten naar elkaar toe totdat beide zitbuizen dicht bij elkaar zitten.



Zet de gevouwen rollator vast met de bruine haak.

5.3 De juiste handgriephoogte/steunhoogte instellen



Open de handgrepen op het stuur. Aan de binnenkant van de steunstangen vind je een hoogteschaal die het gemakkelijker maakt om het linker- en rechterstuur op dezelfde hoogte in te stellen.



Je kunt de juiste hoogte van het handvat vinden door in de rollator te gaan staan, je armen losjes te laten hangen en licht te buigen. De hoogte van de polsen komt nu overeen met de juiste hoogte van de duwhandvatten.



Draai beide handschroeven handvast aan. Tip: Activeer de parkeerrem om te voorkomen dat de rollator wegrolt tijdens het afstellen.



Belangrijk

Stel beide duwhandvatten in op dezelfde hoogte voor een symmetrische houding tijdens het lopen. Druk altijd de parkeerrem in (zie 5.5) als u de rollator wilt verlaten, stoppen of gaan zitten.

5.4 Gebruik van de remmen



Om de rollator te remmen trekt u de remgrepen omhoog richting de duwhandvatten. Om veilig op de rollator te staan, houdt u de remgrepen aangetrokken.



Om de rem los te zetten en verder te lopen, laat je gewoon de remgrepen los.

5.5 De parkeerrem gebruiken



Om de parkeerrem in te schakelen, drukt u de remhendels omlaag totdat u een „klik“ hoort.



Trek de remgrepen omhoog om de parkeerrem los te zetten.



Belangrijk

- Gebruik de remmen wanneer u de rollator niet verplaatst.
- Gebruik altijd de parkeerrem wanneer u de rollator wilt parkeren of wilt gaan zitten.
- Op hellende oppervlakken is het aan te raden om de handrem om je veiliger te voelen en het risico op vallen te minimaliseren.
- Ga met je rug naar de boodschappentas zitten, niet op de tas.
- Ga rechtop op het zitnet zitten terwijl je je onderarmen comfortabel op de duwhandvatten en armsteunen laat rusten.




Info


Is een van je handen beperkt door een beroerte, artrose of iets dergelijks? Dan raden wij aan om de rollator om te bouwen naar een eenhandsrem. Je kunt de remkabel en alle informatie over het ombouwen gratis bij ons opvragen. Neem contact op met ons serviceteam via e-mail: kundenservice@saljol.de.

5.6 Rem afstellen

Als de remkracht afneemt door wielslijtage, moet de rem worden bijgesteld. De remmen moeten zo worden afgesteld dat beide wielen gelijkmatig remmen. De afstand tussen het remblokje en het wieloppervlak moet ongeveer 1 mm zijn.

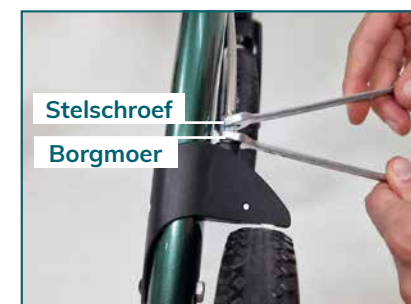

Draai de borgmoer los met een steeksleutel maat 8 en draai hem helemaal naar boven. Draai tegelijkertijd de stelschroef vast.

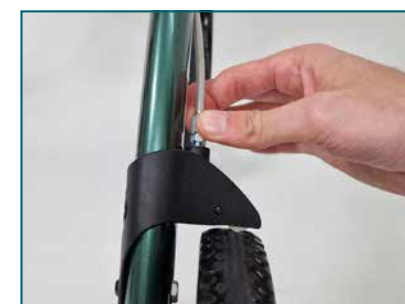

Stel de remkracht af door de stelschroef naar binnen of naar buiten te draaien. Controleer de werking van de rem door de rem door de wielen te draaien en de remgrepen in te knijpen. De wielen moeten vrij draaien, maar onmiddellijk stoppen bij het remmen. Het mag niet mogelijk zijn de wielen te bewegen wanneer de rem is vergrendeld. Draai de borgmoer weer stevig aan.



Let op

De rem is goed afgesteld als de achterwielen blokkeren wanneer de rem wordt gebruikt en niet draaien wanneer ze worden ingedrukt.



Info

Hier vindt u een video, aan de hand van het voorbeeld van onze Aluminium rollator, waarin de remverstelling wordt uitgelegd: <https://www.youtube.com/watch?v=-k-Ru8oiwFM> of scan de QR-code.



5.7 De drempelhulp gebruiken



De drempelhulp bevindt zich bij de achterwielen. Stap met één voet op de drempelhulp en trek de rollator voorzichtig aan de handgrepen naar u toe. De rollator zal nu kantelen. Dit zal u helpen over drempels en stoepranden te stappen.

5.8 De sleeprem gebruiken



Het gebruik van de sleeprem wordt aanbevolen op lichte hellingen of voor mensen met een zeer beperkte loopnelheid. Druk op de rode hendel om de sleeprem te activeren. U kunt de rolsweerstand afstellen met de stelschroef.

6. Onderhoud en hergebruik

6.1 Onderhoud

Hoewel de Saljol Carbon Rollator over het algemeen robuust en duurzaam is dankzij de tegen corrosie beschermde materialen, moet hij toch regelmatig worden schoongemaakt en onderhouden.

Om ervoor te zorgen dat uw rollator altijd veilig gebruikt kan worden, raden wij u aan om regelmatig de controles uit die in het onderhoudsschema staan. Onvoldoende of verwaarloosde zorg en onderhoud van de rollator kan de veiligheid in gevaar brengen en de aansprakelijkheid beperken. Houdt u er echter rekening mee dat het onderhoudsschema geen exacte details van de daadwerkelijke werkzaamheden die aan de rollator uitgevoerd moeten worden. Het is daarom raadzaam om rekening te houden met eventuele problemen of extra onderhoudsvereisten die u opmerkt aan de rollator en indien nodig professionele hulp. Door regelmatig de aanbevolen onderhoudswerkzaamheden en op eventuele afwijkingen te letten, kunt u ervoor zorgen dat uw rollator altijd in optimale conditie is en veilig ondersteunt.

Saljol het recht voor om garantieclaims te beperken als de rollator niet regelmatig is onderhouden.

6.2 Onderhoudsschema

6.2.1 Dagelijkse visuele inspectie

De dagelijkse visuele inspectie van de rollator moet voor elk gebruik worden uitgevoerd. Het helpt om de belangrijkste onderdelen (frame, remmen, handvatten, zitting, rugleuning en wielen) te controleren op beschadigingen, tekenen van slijtage of andere problemen voordat het grote problemen worden. Let op veranderingen of ontbrekende elementen en vraag bij twijfel uw vakhandelaar, Saljol verkooppartner of Saljol GmbH.

6.2.2 Funktionstests

Functietesten helpen ervoor te zorgen dat alle functies van de rollator werken. Als het geteste onderdeel niet goed werkt, moet het onmiddellijk gerepareerd worden, hetzij zelfstandig of door gespecialiseerd personeel. We raden aan om de Carbon rollator minstens één keer per maand aan een functietest te onderwerpen, idealiter twee keer:

- Remtest: Controleer de remmen van de rollator goed werken. Zorg ervoor dat de rollator snel en veilig aan beide kanten tot stilstand kan worden gebracht indien nodig. De parkeerrem moet beide achterwielen blokkeren en voorkomen dat de rollator wegrolt op een hellend/oneffen oppervlak.
- Bandentest: Controleer de banden van de rollator om er zeker van te zijn dat ze gemakkelijk draaien en geen tekenen van overmatige slijtage of schade vertonen. Defecte banden moeten onmiddellijk vervangen worden.
- Stabiliteitstest: Controleer de verbindingen van de rollator om er zeker van te zijn dat ze gemakkelijk bewegen en geen tekenen van slijtage of schade. Verbindingen die te los zitten moeten onmiddellijk worden aangedraaid, verbindingen die te strak zitten moeten iets losser worden gemaakt. Zorg ervoor dat alle wielen tegelijkertijd contact maken met de grond.
- Vouwtest: Voer het vouwproces uit volgens de instructies van de fabrikant en controleer of alle onderdelen correct zijn uitgelijnd en vergrendeld. Het hele proces moet soepel verlopen.
- Handgreepstest: Controleer de hoogteverstelling van de handgrepen om er zeker van te zijn dat ze correct werken en dat de rollator op de juiste hoogte is ingesteld voor de gebruiker. De basisregel: Wanneer u rechtop staat, moeten de polsen zich op gelijke hoogte met de handgrepen bevinden.
- Ruggordeltest: Controleer de ruggordel en de bevestigingsrail regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, slijtage of losse naden. Zorg ervoor dat de riem van de rugleuning altijd volledig in de houder.

6.2.3 Schoonmaken

Afhankelijk van de mate van vervuiling, maar minimaal één keer per maand, dient de gehele rollator gereinigd te worden. Gebruik hiervoor het meegeleverde schoonmaakdoekje. Grover vuil kan ook gereinigd met warm water en een spons. Voor hardnekkig vuil kan een standaard schoonmaakmiddel aan het water worden toegevoegd. Desinfectiemiddelen kunnen zonder problemen worden gebruikt. Plastic onderdelen kunnen het beste worden gereinigd met een in de handel verkrijgbaar plastic reinigingsmiddel. Volg de gebruiksaanwijzing van het gebruikte reinigingsmiddel.

Om het piepen of kraken van het vouwmechanisme te stoppen, zijn eenvoudige middelen zoals. Er kan bijvoorbeeld teflonspray worden gebruikt.

Frame

Reinigen met de meegeleverde reinigingsdoek of, bij grover vuil, met warm water en een spons. Voor hardnekkig vuil kan een in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel aan het water worden toegevoegd. Desinfectiemiddelen kunnen zonder problemen worden gebruikt. Plastic onderdelen kunnen het beste worden gereinigd met een in de handel verkrijgbaar plastic reinigingsmiddel. Volg de gebruiksaanwijzing van het gebruikte reinigingsmiddel.

Om het piepen of kraken van het vouwmechanisme te stoppen, kunnen eenvoudige middelen worden gebruikt. Zoals teflonspray kan worden gebruikt.



Belangrijk

Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen zoals oplosmiddelen/schuurmiddelen of harde borstels.

Wielen

Reinig de wielen met warm water en een mild oplosmiddel. Gebruik indien nodig een plastic borstel, nooit een staalborstel. Eenvoudige producten zoals teflonspray kunnen worden gebruikt om het piepen of kraken van de wielen of de voorvork te stoppen.



Belangrijk

Reinig de rollator nooit met een hogedruk-/stoomreiniger!

Kurk TPE

Stof en andere deeltjes kunnen zich ophopen op het oppervlak van kurk TPE producten tijdens opslag en een „grijze waas“ veroorzaken. Dit is geen defect aan het product, maar kan gemakkelijk worden verwijderd.

De juiste verzorging en reiniging van met kurk TPE gecoate elementen helpt de levensduur van het materiaal te verlengen. Los vuil kan worden verwijderd met een zachte, droge doek of een zachte borstel; zwaarder vuil kan worden verwijderd met een zachte doek en een zeepoplossing. Wring de doek goed uit. Vermijd Wrijf niet krachtig en gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of sponzen, omdat deze de kurk TPE kunnen beschadigen. Om de levensduur van de kurk TPE te behouden, raden we aan om regelmatig te reinigen en te beschermen tegen direct zonlicht, warmtebronnen en vocht.

Kurk is een natuurlijk materiaal en kan ook worden blootgesteld aan licht en vocht. vochtigheid kan de kleur na verloop van tijd veranderen.

6.2.4 Desinfectie

De Carbon Rollator kan worden gedesinfecteerd met standaard huishoudelijke desinfectiemiddelen. De Robert Koch-lijst met goedgekeurde ontsmettingsmiddelen is te vinden op <http://www.rki.de>.

Laat de rollator aan de lucht drogen en houd rekening met de inwerktijd van het desinfectiemiddel dat u gebruikt.

6.3 Hergebruik

De Saljol Carbon Rollator is geschikt voor hergebruik. Het aantal keren dat de rollator kan worden hergebruikt, hangt af van de staat van de materiaalslijtage en de functionaliteit van het product.

Zorg ervoor dat de rollator schoongemaakt en is voordat u deze weer gebruikt. Al het zichtbare vuil dient verwijderd te worden en de rollator dient vervolgens behandeld te worden met een geschikt desinfectiemiddel om er zeker van te zijn dat hij vrij is van ziektekiemen en bacteriën.

Het is ook belangrijk dat u alle controles uitvoert die vermeld staan in sectie 6.2 „Onderhoudsschema“ om ervoor te zorgen dat de rollator in perfecte staat is. De Saljol Carbon Rollator is bestand tegen de middelen die worden gebruikt voor hergebruik.

7. Transportbeschrijving

De rollator is gemakkelijk op te vouwen en daardoor handig op te bergen voor transport. Als het nodig is om de rollator bijvoorbeeld in een auto te vervoeren, volg dan de vouwinstructies. Zorg ervoor dat de rollator veilig opgeborgen om plotselinge en gevaarlijke bewegingen te voorkomen (bijvoorbeeld remmen tijdens het rijden).

De Saljol transporttas als accessoire beschermt je rollator tegen invloeden van buitenaf en schade tijdens transport.

8. Opslag en verzending

Wanneer de rollator niet gebruikt wordt, dient deze rechtop bewaard te worden op een droge plaats, buiten het bereik van kinderen of derden. Indien de rollator opgeslagen of verzonden moet worden, is het raadzaam om de originele verpakking te bewaren en deze voor deze doeleinden op te bergen zodat deze beschikbaar is wanneer nodig. Uw rollator is dan optimaal beschermd tegen omgevingsinvloeden tijdens opslag of transport.

9. Afvalverwijdering

Gooi de materialen gescheiden per soort weg in de daarvoor bestemde inzamelsystemen. gevaarlijk afval in de daarvoor bestemde inzamelsystemen.

10. Technische gegevens en materiaallijst

10.1 Technische gegevens

Carbon Rollator	CR54	CR62	CR62W
Aanbevolen voor lichaamslengte	145 tot 170 cm	160 tot 200 cm	160 tot 200 cm
Max. gebruikersgewicht	150 kg	150 kg	180 kg
Totaal gewicht zonder accessoires	5,6 kg	5,6 kg	5,6 kg
Gewicht zak	0,4 kg	0,4 kg	0,5 kg
Max. Draagvermogen van de netzak	5 kg	5 kg	5 kg
Lengte	67 cm	67,5 cm	67,5 cm
Breedte (open)	61 cm	61 cm	68 cm
Breedte (gesloten)	21 cm	21 cm	21 cm
Zitbreedte (tussen de handgrepen)	45 cm	45 cm	52 cm
Laagste hoogte	76 cm	81 cm	81 cm
Handgreephoogte (verstelbaar)	76-88 cm	81-103 cm	81-100 cm
Zithoogte	54 cm	62 cm	62 cm
Remmen	2x handrem met parkeerfunctie	2x handrem met parkeerfunctie	2x handrem met parkeerfunctie
Slijprem op maat	2x schuifrem op de achterwielen	2x schuifrem op de achterwielen	2x schuifrem op de achterwielen
Wielen (diameter x breedte)	200 x 32 mm – zwart, zachte polyurethaan wielen met stabiel midden	200 x 32 mm – zwart, zachte polyurethaan wielen met stabiel midden	200 x 32 mm – zwart, zachte polyurethaan wielen met stabiel midden
Draaicirkel	118 cm	118 cm	122 cm
Reflectoren	31 stuks	31 stuks	31 stuks

10.2 Gebruikte materialen

Frame	Koolstofvezel
Vouwmechanisme	Aluminium 6061-T6 met zwarte poedercoating
Basis voor het handvat	Kunststof – polyamide 6 met 30% glasvezel (PA 6 GF30)
Handgreep	Thermoplastische elastomeren (TPE) met 20-30% kurk
Remhendel	Kunststof – polyamide 6 met 30% glasvezel (PA 6 GF30)
Remblokken	Kunststof – polyamide 6 met 15% glasvezel (PA 6 GF15)
Voorvork	Polypropyleen kunststof met 15% glasvezel (PP GF15)
Zitnet/stoffen zitting	100% polyester
Velgen	Polypropyleen kunststof met 15% glasvezel (PP GF15)
Wielen	+Polyurethaan 40 Shore A (wieloppervlak) Polyurethaan 65 Shore A (wielhiel)

11. Garantie

Als het gekochte artikel defect is, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor defecten. Als u de goederen bij een speciaalzaak hebt gekocht, neem dan onmiddellijk contact op met uw verkoper; als u rechtstreeks bij Saljol koopt, neem dan rechtstreeks contact op met Saljol op +49 (0)8141 317740. Herkenbare gebreken moeten binnen tien dagen na levering schriftelijk worden gemeld, verborgen gebreken binnen tien dagen na ontdekking. Bovengenoemde termijnen zijn fatale termijnen. Saljol heeft het recht om te beslissen of een gebrek wordt verholpen door rectificatie of nalevering („nalevering achteraf“). Voor het overige gelden de bepalingen in de Algemene Voorwaarden van Saljol, te vinden op <https://www.saljol.de/de/agb/>.

Naast de wettelijke garantieclaims en zonder deze te beperken, geeft Saljol 2 jaar garantie op dit product vanaf de aankoopdatum. U heeft ook de mogelijkheid om deze garantie met 2 jaar te verlengen als u de rollator uiterlijk 4 weken na aankoopdatum online registreert. Registratie kan gedaan worden www.saljol.de/garantie/

Reikwijdte van de garantie

Wij garanderen dat het product binnen de garantieperiode vrij is van materiaal-, fabricage- en functiegebreken. Als er tijdens de garantieperiode een defect optreedt, zullen we, naar eigen goeddunken, het product gratis vervangen of vervang deze indien nodig door een nieuwe. De garantie geldt voor slijtageonderdelen zoals handvatten, net, remmechanisme, banden en de meegeleverde accessoires (tas, rugband, bel, LED-lampje).

Deze garantievoorwaarden gelden alleen voor producten die in Duitsland zijn gekocht, mits ze rechtstreeks bij Saljol of bij een geautoriseerde vakhandelaar zijn gekocht. Voor in het buitenland gekochte producten geeft de verkoper informatie over de garantievoorwaarden. Garantieservices en vervangende leveringen omwille van de garantie verlengen de garantieperiode niet.

Uitsluiting van de garantie

De garantie vervalt als de rollator verkeerd is onderhouden of gerepareerd of door een ongeschoold persoon of als het product is gebruikt met niet-originele accessoires. Onjuiste montage of installatie als gevolg van het niet naleven van de gebruiksaanwijzing, onjuist gebruik of onjuist gebruik of onderhoud van het product maken de garantie, evenals invloeden van buitenaf (bijvoorbeeld transportschade, schade door stoten en stoten, weersinvloeden).

12. Opmerking over de verplichting om incidenten te melden

Alle ernstige incidenten in verband met het product moeten aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit worden gemeld. Ernstige incidenten in de zin van de wet zijn alle ongewenste voorvallen die een van de volgende gevolgen hebben: dood, levensbedreigend letsel, blijvende lichamelijke schade en chronische ziekte.

In de Bondsrepubliek Duitsland, gelieve te informeren:

- uw plaatselijke distributeur, Saljol-verkooppartner of Saljol GmbH, Frauenstr. 32, D-82216 Maisach; www.saljol.de
- het Federaal Instituut voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (BfArM), Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn; www.bfarm.de

In lidstaten van de EU, gelieve te informeren:

- uw plaatselijke distributeur, Saljol verkooppartner of Saljol GmbH, Frauenstr. 32, D-82216 Maisach; www.saljol.de
- de autoriteit die verantwoordelijk is voor incidenten met medische hulpmiddelen in uw land

13. Accessoires




Rugsteun

Dankzij de rugsteun kunt u comfortabel op de rollator zitten en ertegen leunen. Deze is verstelbaar en daardoor ook geschikt voor lange mensen. De rugsteun biedt u meer comfort bij het zitten op de rollator. Door de grote uitsparing wordt uw zicht op de weg niet belemmerd wanneer u loopt. Een reflecterende voering biedt meer veiligheid.



Lange remkabel voor conversie naar een éénhands simultaanrem

Een enorm voordeel voor iedereen die niet meer de volledige kracht in beide handen heeft. Kunt een video over de conversie vinden op: <https://www.youtube.com/watch?v=8rp9Gye0esA> of scan de QR-code:

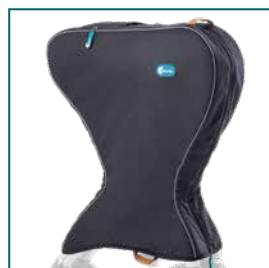

Reistas

Bescherm uw rollator tegen invloeden van buitenaf en schade tijdens het opbergen. De gevoerde tas kan eenvoudig van achteren over de rollator worden geschoven. Dankzij ritssluitingen ter hoogte van de handvatten van de rollator kunt u er veilig mee manoeuvreren, zelfs opgevouwen.



Design tas van JOST

De moderne designertas voor je rollator in zwart is stevig en waterafstotend. Hij kan ook worden gebruikt als handtas of schoudertas en is belastbaar met 5 kg.



Houten dienblad met vilten onderlaag

De tafel dekken is kinderspel! Met de hoogwaardige dienblad voor de rollator maakt het gemakkelijk om spullen van A naar B te vervoeren.



Stevige zitting

De gevoerde zitting verbetert uw ondersteuning wanneer u op de rollator zit. U zit rechtop en veilig – waar u ook bent.



Paraplu

Ga je naar buiten in vies weer? Met de paraplu op de rollator blijf je droog en kun je veilig duwen met beide handen. Uitgestrekt als parasol geeft hij schaduw. Verkrijgbaar in zwart of karamel. Eenvoudig te monteren!



LED lamp

Met het heldere LED-licht op uw rollator bent u goed zichtbaar in het donker. Ook geschikt voor het verlichten van de voetenruimte - zodat u kleine obstakels kunt zien.



Bel

Met de bel op uw rollator kunt u de aandacht trekken in het verkeer. Schroef hem eenvoudig vast en laat de bel rinkelen, net als op een fiets.



Tas

De tas, die volledig verkrijgbaar is in zwarte gewezen stof of in een combinatie van zwarte gewezen stof en bruin imitatieleer, kan worden beladen met 5 kg, kan met één hand worden verwijderd en heeft een praktische magneetsluiting.





Universele stokhouder
De wandelstokhouder houdt loophulpmiddelen van verschillen-
de diameters veilig op de rollator. Hij kan rechts en links van het
frame en de hoogteverstelling van de rollator bevestigd worden.
Een wandelstokhouder is al voorgemonteerd op de Carbon rolla-
tor.



Opmerking
U kunt de accessoires bestellen in onze online winkel www.saljol.de/en
24-7 of telefonisch via onze klantenservice (ma.-vr. 9.00–16.00 uur) op
het nummer +49 (0)8141 317740 vanuit huis. Of neem contact op met de
dealer waar u de allround rollator heeft aangeschaft.
De accessoires kunnen per land verschillen.

14. Testrapport voor hergebruik

Testrapport voor hergebruik door een gekwalificeerde specialist.

Vraag	Ja	Nee
Zijn alle labels op het product aangebracht?		
Zijn er losse of losgeraakte schroeven?		
Werken beide parkeerremmen?		
Kunnen de parkeerremmen gemakkelijk worden geactiveerd?		
Kan de rollator gemakkelijk in- en uitgeklapd worden?		

Datum

Onderzoeker

Stempel/handtekening



Instruction manual

Preface

Thank you for purchasing a Saljol Carbon Rollator! With your new rollator, you will be able to lead a mobile and self-determined life in style. The Carbon Rollator has been developed with a lot of attention to safety and will support you in your everyday life.

Please read the instruction manual and the product guide thoroughly before using your Carbon Rollator for the first time. They contain important safety information, useful tips for use and care, as well as a list of recommended accessories.



Content

1.	Identification.....	25
2.	General notes.....	25
3.	Notes.....	27
3.1	Safety instructions.....	27
3.2	Instructions for the safe use of the product.....	27
4.	Scope of delivery and product overview.....	28
4.1	Scope of delivery.....	28
4.2	Marking/Label.....	29
4.3	Product overview.....	30
5.	Operation.....	31
5.1	Unfolding the rollator.....	31
5.2	Folding the rollator.....	32
5.3	Adjusting the correct handle height/support height.....	32
5.4	Use of the handbrake.....	33
5.5	Use of the parking brake.....	33
5.6	Brake adjustment.....	34
5.7	Using the tipping aid.....	35
5.8	Using the grinding brake.....	35
6.	Maintenance and reuse.....	35
6.1	Maintenance.....	35
6.2	Maintenance schedule.....	36
6.2.1	Daily visual inspection.....	36
6.2.2	Function tests.....	36
6.2.3	Cleaning.....	36
6.2.4	Disinfection.....	37
6.3	Reuse.....	38
7.	Transport description.....	38
8.	Storage and shipping.....	38
9.	Disposal.....	38
10.	Technical data and list of materials.....	39
10.1	Technical data.....	39
10.2	Materials used.....	39
11.	Warranty and guarantee.....	40
11.1	Warranty.....	40
11.2	Guarantee.....	40
12.	Note on the obligation to report incidents.....	41
13.	Accessories.....	41
14.	Test protocol for reuse.....	44

1. Identification

Manufacturer:

Product:

Type:

Article name:

Version:

Saljol GmbH

Carbon Rollator

Lightweight rollator

Carbon Rollator

2025

Manufacturer:

Frauenstraße 32

D-82216 Maisach

Phone: +49 (0)8141 317740

Fax: +49 (0)8141 3177411

Mail: hallo@saljol.de

Web: www.saljol.de

Swiss representative and importeur:

CH

REP

CON GmbH

Talgut-Zentrum 7

CH-3063 Ittigen

Formalities of the operating instructions

Version/Revision:

Creation date:

2025.02

07.08.2025

Information is correct at the time of going to press.

We reserve the right to make technical changes. Technical drawings and photos may differ from reality.

©2025 Saljol GmbH: all rights reserved. Reprinting, including excerpts, only with the permission of Saljol GmbH.

2. General notes

Purpose

The Carbon Rollator by Saljol has been developed for indoor and outdoor use and is only suitable for use on firm and level ground. With the help of the Carbon Rollator by Saljol, people can stand and walk again and the user can rest on the integrated seat. Everyday routine tasks can be performed by users with the Saljol Carbon Rollator without having to rely on assistance from others. Applications: The Carbon Rollator by Saljol is designed to cover a wide range of health problems. It is specially designed for people who need extra stability support when walking.

Indication

The Carbon Rollator by Saljol is designed exclusively for use as a walking aid and is particularly suitable for patients with limited mobility due to physical impairments, limitations of the active or passive musculoskeletal system and diseases such as arthritis, osteoporosis, muscle weakness, stroke or Parkinson's disease.

Contraindication

The Saljol Carbon Rollator is not suitable for people with very weak arm strength, significant cognitive impairment, or very poor balance. The use and application of the Saljol Carbon Rollator should be assessed and instructed by a doctor or therapist.

Service life

With proper use, regular care and maintenance by a specialist company and compliance with the safety instructions, the expected lifespan of the Carbon Rollator is up to 4 years.
If the rollator is still in proper condition after 4 years, you can continue to use it.

Responsibility

As the manufacturer, we can only consider ourselves responsible for the safety, reliability and usability of the rollator if changes, expansions, repairs and maintenance work are carried out regularly and only by authorized specialists and if the rollator is used properly in compliance with all instructions for use.

Declaration of conformity



Saljol, as the manufacturer of the product, declares that the Carbon Rollator fully complies with the requirements of Medical Device Regulation (2017/745) (status 2022). A CE Declaration of Conformity can be found on our homepage www.saljol.de.
The manufacturer declares that the following products are approved with Product designation Carbon Rollator, Version 2025

Saljol Carbon Rollator CR62	British Racing Green	4058789013960
Saljol Carbon Rollator CR62	Midnight Blue	4058789013977
Saljol Carbon Rollator CR62	Matt Black	4058789013991
Saljol Carbon Rollator CR62	Copper Red	4058789014714
Saljol Carbon Rollator CR62	Pure Gold	4058789014738
Saljol Carbon Rollator CR54	British Racing Green	4058789014004
Saljol Carbon Rollator CR54	Midnight Blue	4058789014011
Saljol Carbon Rollator CR54	Matt Black	4058789014035
Saljol Carbon Rollator CR54	Copper Red	4058789014721
Saljol Carbon Rollator CR54	Pure Gold	4058789014745
Saljol Carbon Rollator CR62W	British Racing Green	4058789015766

comply with the following harmonised standards: EN ISO 11199-2:2021.
Walking aids manipulated by both arms – Requirements and test methods – Part 2: Rollators; Seat and handles meets the biological assessment according to ISO 10993-5: 2009-10

3. Notes

3.1 Safety instructions

The instruction manual contains safety notes that are marked twice: by a symbol and by a signal word. The symbol informs you about the type of notice. The signal word explains more details, for example the severity of an impending risk.



Caution/Important
Possibly dangerous situation (minor injuries or material damage), commitment to a particular behaviour or activity for the safe use of the rollator



Note
Application tips and useful information

3.2 Instructions for the safe use of the product

For safe use of the product, please keep the following in mind:



- Restrictions on use**
- The maximum user weight for the CR54 and CR62 must not exceed 150 kg. The maximum user weight for the CR62W must not exceed 180 kg.
 - The bag may be loaded with a maximum of 5 kg.
 - It is not permitted to move yourself around with your feet (tripping) while being seated on the rollator.
 - The rollator is designed for both indoor and outdoor use.
 - Never use in the presence of flammable/combustible and burning substances.



Caution
Fingers or other parts of the body of the user and/or a third party could be pinched when folding the rollator or adjusting the handle height. Therefore, be extremely attentive and careful when adjusting the device. Be aware of gaps in the rollator to protect yourself from trapping your fingers and other body parts.



Accident prevention

- Please remove all attached cork-coloured labels before using the Rollator.
- Only use the rollator for the defined purpose.
- Only use the rollator if it is in perfect technical condition.
- It is prohibited to make any constructive changes to the rollator, unless you have the written consent of the manufacturer, Saljol.
- While adjusting the rollator, be careful not to pinch your fingers or other body parts on the moving parts.
- Always ensure that the back belt is fully inserted into the holder at all times.
- Make sure that both parking brakes are activated when you sit down on the rollator.
- All four wheels must be in contact with the ground at all times. Only in this way the rollator is safely balanced which prevents accidents.
- Note that on sloping terrain, the rolling speed of the Saljol Carbon Rollator may be higher than your walking speed. There is an increased risk of falling. Please note the use of the grinding brake for this purpose.
- Always be careful when crossing thresholds, railway tracks, gully covers with wide slits and the like. A wheel can get caught or trapped in them, stop abruptly and you might fall.
- Be careful when walking on icy ground and small obstacles such as branches, walk carefully so that you can react quickly.
- Always apply both parking brakes when you stop or park the rollator.

4. Scope of delivery and product overview

4.1 Scope of delivery

The equipment of our products may vary depending on the country and configuration to meet local requirements. Therefore, the scope of delivery may differ.

1x Saljol Carbon Rollator	1x bell* (mounted)
1x bag (mounted)	1x care cloth*
1x back belt*	1x product guide*
1x cane holder (mounted)	1x instruction manual
1x LED lamp* (mounted)	

*Not included in the scope of delivery, depending on the variant



Important

Instructions for using the back belt, bell and LED light can be found in the operating instructions supplied.

4.2 Marking/Label

The product label is on the inside of the left frame part. It contains important information about the product: EAN code, product name, production date, product colour and weight, product dimensions, maximum user weight, maximum payload of the bag, seat height, manufacturer information of Saljol and the serial number. The label must not be removed.

The following symbols can be found, partly in combination with further information, on the marking of the Carbon Rollator and on the packaging to identify important properties.




Order number/item number



Production date



Colour and total weight

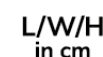

Length/width/height of the rollator in cm



Maximum user weight



Maximum payload weight of the bag



Seat height



Observe instruction manual



CE marking



Manufacturer of the product



Serial number



Medical device



Product suitable for indoors and outdoors

REF	EAN	Carbon Rollator
4	058789 009031	2021-01-01
		Green
		L/W/H in cm 67/61/81-103
		150 kg
		5 kg
		62 cm
		MD CE
		SALJOL
		SALJOL GmbH Frauenstraße 32 82216 Maisach Germany
SN		1234567890123456

4.3 Product overview

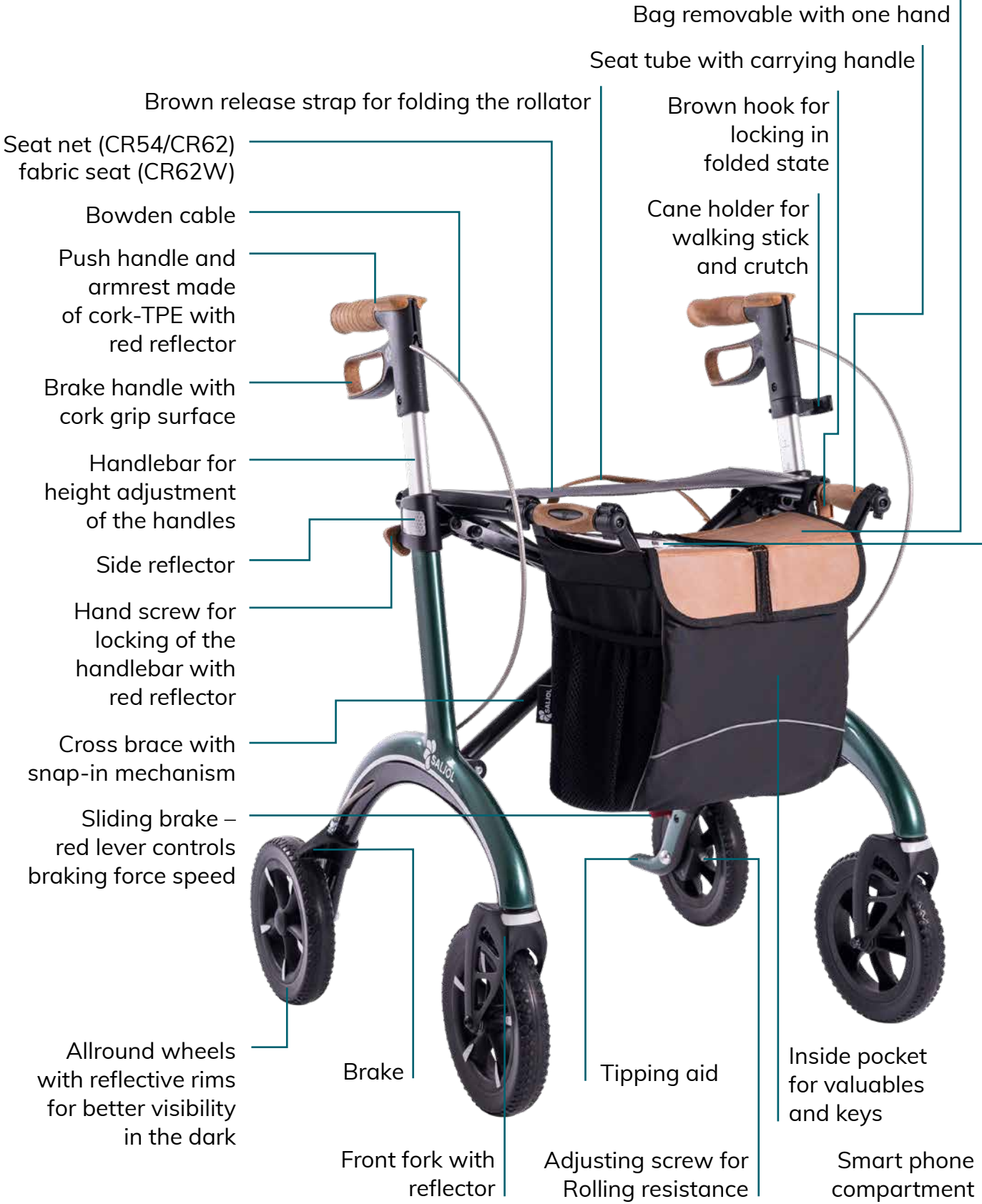


Figure 1: The Saljol Carbon Rollator (back belt, bell und LED-light not shown)

5. Operation

Inventory

Take the Saljol Carbon Rollator out of the box and check if anything is missing. Compare with figure 1 on page 30 and with the scope of delivery, described in 4.1 on page 28. If any part is missing or damaged, contact your dealer or Saljol immediately.

5.1 Unfolding the rollator



Open the brown hook to unlock the folding mechanism.



Hold both handles and push or pull them apart in parallel.



Finally, push both seat tubes down with your hands until you hear a „click“ sound.



Important

Now test whether you can pull the seat tubes upwards. If this does not work, the rollator is correctly and safely unfolded. If in doubt, compare with figure 1 on page 30. After unfolding the rollator, please make sure that it is securely closed with an audible click of the lock and that the seat is well tensioned. Make sure that both push handles are securely inserted in the frame and firmly fixed with the hand screw. Always test the secure fit of all accessories BEFORE use. Failure to observe these warnings may result in injury.

5.2 Folding the rollator



Pull the brown release strap on the seat upwards with a slight tug to fold the rollator.



Push the rollator together by the handles until both seat tubes are close together.



Secure the folded rollator with the brown hook.

5.3 Adjusting the correct handle height/support height



Open the hand screws on the handlebars. On the inside of the support bars you will find a height scale that makes it easier to adjust the left and right handlebars to the same height.



You can find the correct grip height by standing in the rollator, letting your arms dangle loosely and bending them slightly. The height of the wrist now corresponds to the correct height of the push handles.



Tighten both hand screws hand-tight.
Tip: Activate the parking brake so that the rollator does not roll away when you adjust it.



Important

Adjust both push handles to the same height to achieve a symmetrical posture when walking. Always press the parking brake (see 5.5) when you want to leave the rollator, stop or sit down.

5.4 Use of the handbrake



To brake the rollator, simply pull the brake handles upwards towards the push handles. To stand safely in the rollator, keep the brake handles pulled.



To release the brake and continue walking, simply release the brake handles.

5.5 Use of the parking brake



To apply the parking brake, press the brake handles down until you hear a „click“ sound.



To release the parking brake, pull the brake handles upwards.



Important

- Use the brakes when you are not moving the rollator.
- Always apply the parking brake when you park the rollator or want to sit down.
- It is recommended to use the brakes on inclined grounds to get a safer feeling and minimize the risk of falling.
- Sit with your back to the shopping bag, not on the bag.
- Sit upright on the seat net while resting your forearms comfortably on the push handles and armrests.




Info

Is one of your hands limited due to a stroke, arthritis, or a similar condition? If so, we recommend converting your rollator to a one-hand brake. You can obtain the brake cable and all information about the conversion from us free of charge. Please contact our service team by email: kundenservice@saljol.de.

5.6 Brake adjustment

If the braking force decreases due to wear of the wheels, the brake must be adjusted. The brake should be adjusted so that both wheels brake evenly. The distance between the brake pad and the wheel surface should be approx. 1 mm.

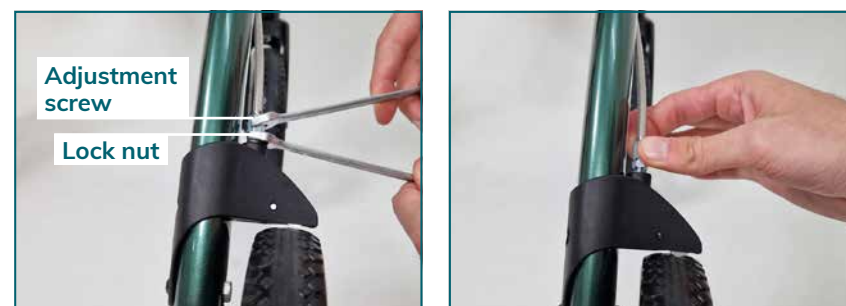

Loosen the lock nut with a size 8 open-end spanner and turn it completely upwards. Fix the adjustment screw at the same time.

Adjust the braking force by turning the adjustment screw inwards or outwards. Check the brake function by turning the wheels and operating the brake handles. The wheels should turn freely but stop immediately when braking. It should not be possible to move the wheels when the brake is locked. Tighten the lock nut tightly again.



Caution

The brake is correctly adjusted if, when the brake is applied, the rear wheels lock and do not turn when pushed.



Info

Here you can find a video, using the example of our Allround Rollator, in which the brake adjustment is explained: <https://www.youtube.com/watch?v=-k-Ru8oiwFM> or scan the QR code.




5.7 Using the tipping aid



The tipping aid is located behind the rear wheels. Step on the tipping aid with one foot and pull the rollator slightly towards you using the handles. The front wheels are now in the air. This way you overcome thresholds and curbs.

5.8 Using the grinding brake

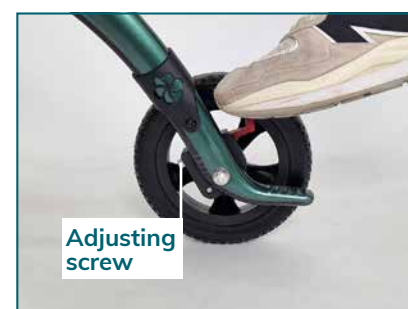

The grinding brake is recommended for slight slopes or for people with severely limited walking speed. Press the red lever to activate the grinding brake. You can adjust the rolling resistance at the adjusting screw.

6. Maintenance and reuse

6.1 Maintenance

Although the Saljol Carbon Rollator is generally robust and durable due to corrosion-protected materials, it still requires regular cleaning and maintenance.

To ensure that your rollator can be operated safely at all times, we recommend that you regularly carry out the checks specified in the maintenance schedule. Insufficient or neglected care and maintenance of the rollator can lead to an impairment of safety and limit liability. Please note, however, that the maintenance plan does not contain precise information on the actual amount of work required on the rollator. It is therefore advisable to consider any problems or additional maintenance needs you notice on the rollator accordingly and seek professional help if necessary. By carrying out the recommended maintenance regularly and paying attention to any deviations, you can ensure that your rollator is always in optimal condition and provides you with safe support.

Saljol reserves the right to limit guarantee claims if the rollator has not been regularly maintained.

6.2 Maintenance schedule

6.2.1 Daily visual inspection

The daily visual inspection of the rollator should be carried out before each use. It helps to check main components (frame, brakes, handles, seat, back belt and wheels) for any damage, signs of wear or other problems before they become major problems. Look for changes or missing elements and if in doubt ask your dealer, Saljol distributor or Saljol GmbH.

6.2.2 Function tests

Function tests help to ensure that all functions of the rollator are working properly. If the tested component does not function properly, it must be repaired immediately by yourself or by qualified personnel. We recommend that the Carbon Rollator is subjected to function tests at least once a month, ideally twice. The function tests include:

- Brake test: check the rollator's brakes to make sure they are working properly. Make sure that the rollator can be brought to a stop quickly and safely on both sides if necessary. The parking brake should lock both rear wheels and prevent the rollator from rolling away on an inclined/uneven surface.
- Tyre test: Check the rollator's tyres to ensure that they turn easily and show no signs of heavy wear or damage. Defective tyres should be replaced immediately.
- Stability test: Check the rollator's connections to ensure they move easily and show no signs of wear or damage. Connections that are too loose should be tightened immediately, connections that are too stiff should be loosened a little. Make sure that all wheels are in contact with the ground at the same time.
- Folding test: Carry out the folding process according to the manufacturer's instructions and make sure that all parts are properly aligned and locked. The whole process should work smoothly.
- Handle test: Check the height adjustment of the handles to ensure that it works correctly and that the rollator is set at the correct height for the user. The basic rule: when standing straight, the wrists must be at the same height as the handles.
- Back belt test: Regularly check the back belt and its mounting rail for visible damage such as cracks, wear, or loose stitching. Ensure that the back belt is always fully inserted into the holder.

6.2.3 Cleaning

Depending on the degree of soiling, but at least monthly, the entire rollator must be cleaned. To do so, use the included care cloth. Cleaning of heavier dirt can be done with warm water and a sponge. In case of stubborn dirt, a commercial cleaning agent can be added to the water. Disinfectants can be used without any problems. Plastic parts are best cleaned with a commercially available plastic cleaner. Please follow the instructions for use of the cleaning agent used. To stop squeaking or creaking of the folding mechanism, simple agents such as Teflon spray can be used.

Frame

Cleaning can be done with the supplied care cloth, or for heavier dirt, with warm water and a sponge. In case of stubborn soiling, a commercial cleaning agent can be added to the water. Disinfectants can be used without any problems. Plastic parts are best cleaned with a commercially available plastic cleaner. Please follow the instructions for use of the cleaning agent used.

To stop squeaking or creaking of the cross struts, simple means such as Teflon spray can be used.



Important

Never use aggressive cleaning agents such as solvents/abrasives or hard brushes.

Wheels

Clean the wheels with warm water and a mild solvent. If necessary, use a plastic brush, never a wire brush. To stop the squeaking or creaking of the wheels, or the front fork, simple means such as Teflon spray can be used.



Important

Never clean the rollator with a high-pressure/steam cleaner!

Cork TPE

Dust and other particles can settle on the surface of cork TPE products during storage and cause a „grey haze“. This is not a product defect but can be easily removed.

Proper care and cleaning of cork TPE coated elements will help extend the life of the material. Loose dirt can be removed with a soft, dry cloth or a soft brush; heavier dirt with a soft cloth and soap solution. Wring out the cloth well. Avoid rubbing heavily or using abrasive cleaners or sponges as these may damage the cork TPE. To preserve the life of the cork TPE, we recommend regular cleaning and protection from direct sunlight, heat sources and moisture.

Cork is a natural material and can also change colour over time under the influence of light and humidity.

6.2.4 Disinfection

The Carbon Rollator can be disinfected with standard household disinfectants. The Robert Koch list of approved disinfectants can be found at <http://www.rki.de>. Allow the rollator to air dry and observe the exposure time of the disinfectant you are using.

6.3 Reuse

The Saljol Carbon Rollator is suitable for reuse. The number of times the rollator can be used again depends on the state of wear of the material and the functional capability of the product.

Before using the rollator again, make sure that it has been cleaned and disinfected. All visible dirt should be removed and the rollator should then be treated with a suitable disinfectant to ensure that it is free of germs and bacteria.

It is also important that you carry out all the checks listed in point 6.2 „Maintenance schedule“ to ensure that the rollator is in perfect condition.

The Saljol Carbon Rollator is resistant to the agents used for reuse.

7. Transport description

The rollator is easy to fold and thus convenient to store for transport. If it is necessary to transport it, e.g. in the car, please follow the instructions for folding. Make sure to store the rollator in a safe way to secure it against sudden and dangerous movements (e.g. braking when driving a car).

The Saljol transport bag as an accessory protects your rollator from external influences and damage during transport.

8. Storage and shipping

When not in use, keep the rollator upright, in a dry place, out of reach of children or third parties. If the rollator is to be stored or shipped, it is advisable to keep the original packaging and store it for these purposes so that it is available when needed.

Then your rollator is optimally protected against environmental influences during storage or transport.

9. Disposal

Dispose materials separately by type in the designated collection systems.

Please dispose hazardous waste in the designated collection systems.

10. Technical data and list of materials

10.1 Technical data

Carbon Rollator	CR54	CR62	CR62W
Recommended for body height	145 to 170 cm	160 to 200 cm	160 to 200 cm
Max. user weight	150 kg	150 kg	180 kg
Total weight without accessories	5.6 kg	5.6 kg	5.6 kg
Weight bag	0.4 kg	0.4 kg	0,5 kg
Max. bag load	5 kg	5 kg	5 kg
Length	67 cm	67.5 cm	67.5 cm
Width (open)	61 cm	61 cm	68 cm
Width (closed)	21 cm	21 cm	21 cm
Seat width (between push handles)	45 cm	45 cm	52 cm
Lowest height	76 cm	81 cm	81 cm
Handle height (adjustable)	76–88 cm	81–103 cm	81–100 cm
Seat height	54 cm	62 cm	62 cm
Brakes	2x handbrake with parking function	2x handbrake with parking function	2x handbrake with parking function
Individual grinding brake	2x grinding brake on the rear wheels	2x grinding brake on the rear wheelsn	2x grinding brake on the rear wheels
Wheels (diameter x width)	200 x 32 mm – black, soft polyur-ethane wheels with stable core	200 x 32 mm – black, soft polyur-ethane wheels with stable core	200 x 32 mm – black, soft polyur-ethane wheels with stable core
Turning radius	118 cm	118 cm	122 cm
Reflectors	31 pieces	31 pieces	31 pieces

10.2 Materials used

Frame	Carbon fibre
Folding mechanism	Aluminium 6061-T6 with black powder coating
Base for handle	Plastic – polyamide 6 with 30 % glass fibre (PA 6 GF30)
Handle	Thermoplastic elastomers (TPE) with 20-30% cork
Brake handle	Plastic – polyamide 6 with 30 % glass fibre (PA 6 GF30)
Brake pads	Plastic – polyamide 6 with 15 % glass fibre (PA 6 GF15)
Front fork	Plastic – polypropylene with 15 % glass fibre (PP GF15)
Seat net/fabric seat	100% polyester
Rims	Plastic Polypropylene with 15 % glass fibre (PP GF15)
Wheels	Polyurethane 40 Shore A (wheel surface) + Polyurethane 65 Shore A (wheel bead)

11. Warranty and guarantee

11.1 Warranty

If the purchased item is defective, the provisions of the statutory liability for defects shall apply.

Insofar as you have purchased the goods from a specialist retailer, please contact your seller immediately; if you have purchased directly from Saljol, please contact Saljol directly, Tel. +49 (0)8141 317740. Visible defects must be reported in writing within ten days of delivery, hidden defects within ten days of their discovery. The above-mentioned deadlines are preclusive deadlines. Saljol shall be entitled to decide whether a defect, if any, shall be remedied by rectification or subsequent delivery („subsequent performance“). In all other respects, the provisions in the General Terms and Conditions of Saljol, available at <https://www.saljol.de/en/data-protection/>, shall apply.

11.2 Guarantee

In addition to the statutory warranty claims and without limiting them, Saljol gives a guarantee of 2 years from the date of purchase on this product.

You also have the option to extend this guarantee by a further 2 years if you register the rollator online no later than 4 weeks after the date of purchase. You can register at www.saljol.de/en/extended-warranty/

Scope of the guarantee

We guarantee that the product will be free from defects in material, workmanship and function within the guarantee period. If a defect occurs during the guarantee period, we will, at our own discretion, either repair the product free of charge or, if necessary, replace it with a new one. Excluded from the guarantee are parts subject to wear and tear such as handles, seat net, brake mechanism, tyres and the included accessories (back belt, bag, bell, LED light).

These guarantee conditions only apply to products purchased in Germany, provided they were purchased from Saljol directly or from an authorised specialist dealer.

The seller will provide information on the guarantee conditions for products purchased abroad. Guarantee services and replacement deliveries for guarantee reasons do not result in an extension of the guarantee period.

Exclusion of the guarantee

The right to claim under guarantee expires if the rollator has been improperly maintained or repaired by an untrained person or if the product has been operated with non-original accessories. Incorrect set-up or installation due to non-observance of the operating instructions, use contrary to the intended purpose or improper use or care of the product will result in a loss of guarantee, as will external influences (e.g. transport damage, damage due to impacts and blows, weather influences).

12. Note on the obligation to report incidents

Please note that all serious incidents occurring in connection with the product must be reported to the manufacturer and the competent authority. Serious incidents in the sense of the law are all adverse events that have one of the following consequences: Death, life-threatening injury, permanent bodily damage and chronic illness.

In the Federal Republic of Germany, please inform:

- your local distributor, Saljol sales partner or
Saljol GmbH, Frauenstr. 32, D-82216 Maisach; www.saljol.de
- the Federal Institute for Drugs and Medical Devices (BfArM),
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn; www.bfarm.de

In EU Member States, please inform:


- your local distributor, SALJOL sales partner or
Saljol GmbH, Frauenstr. 32, D-82216 Maisach; www.saljol.de
- the authority responsible for incidents involving medical devices in your country

13. Accessories



Back belt

Thanks to the back belt, you can sit comfortably on the rollator and lean against it. It is adjustable and therefore also suitable for tall people. The back belt offers you more comfort when sitting in the rollator. Due to the large recess it does not restrict your view on the road when you walk. A reflective stripe offers more security.

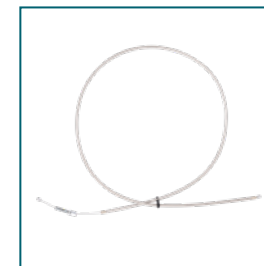

Long brake cable for conversion to one-hand simultaneous brake

A huge advantage for those who no longer have full strength in both hands. You can find a video on the conversion under: <https://www.youtube.com/watch?v=8rp9Gye0esA> or scan the QR code:




Transport bag

Protect your rollator from external influences and damage when stowing it away. The padded bag can easily be put over the rollator from behind. Thanks to zips at the height of the rollator handles, you can manoeuvre it safely even when folded.



Designer bag from JOST

The modern designer bag for your rollator in black is stable and waterrepellent. It can also be used as a hand or shoulder bag and can be loaded with 5 kg.

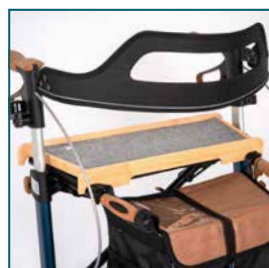


Wooden tray with felt pad

Setting the table will be easy as pie. The high-quality tray for the rollator makes it easy to transport things from A to B.



Firm seat

The padded seat improves your hold when you sit on the rollator. You sit upright and safely – no matter where.

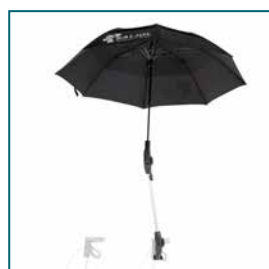

Umbrella

Going out in rainy weather? With the umbrella on the rollator you stay dry and can push safely with both hands. Used as a parasol, it provides shade. Available in black or caramel. Easy to assemble!



LED light

With the bright LED light on your rollator, you are clearly visible in the dark. Also suitable for illuminating the footwell – so you can see small obstacles.



Bell

With the bell on your rollator, you can draw attention to yourself in road traffic. Simply screw it on and ring, just like on a bicycle.



Bag

The bag, available completely made of black woven fabric or in a combination of black woven fabric and brown faux leather, can be loaded with 5 kg, can be removed with one hand and has a practical magnetic closure.



Universal stick holder

The cane holder holds walking aids of different diameters firmly on the rollator. can be attached to the right and left of the frame and the height adjustment of the rollator. One cane holder is already pre-mounted on the Carbon Rollator.



Note

You can order the accessories in our online shop www.saljol.de around the clock or by telephone via our customer service (Mon.-Fri. 9am-4pm) on the number +49 (0)8141 317740 from home. Available accessories may vary depending on the country.

14. Test protocol for reuse

Test protocol for reuse by a qualified specialist.

Question	Yes	No
Does the product have all labels stuck on?		
Are there any loose or loosened screws?		
Are both parking brakes working?		
Are the parking brakes easy to activate?		
Is the rollator easy to fold/unfold?		

Date

Auditor

Stamp/Signature

