Saljol Rückengurt

für Saljol Carbon Rollator und Allround Rollator

Bedienungsanleitung

Hersteller: Saljol GmbH

Frauenstraße 32

D-82216 Maisach

Phone: +49 (0)8141 317740 Fax: +49 (0)8141 3177411

Mail: hallo@saljol.de Web: www.saljol.de

Artikelnummer: 4058789013595

Produktübersicht1 Reflektorstreifen

- 2 Aussparung für bessere Sicht auf den Boden vor Ihnen
- 3 Atmungsaktives Netzfutter
- 4 Befestigungsschiene
- 5 Schrauben zur Längenverstellung







Führen Sie die beiden Befestigungsschienen des Rückengurtes in die Halterungen an der Rückseite der Handgriffe Ihres Saljol Carbon/Allround Rollators ein.
Achten Sie beim Montieren des Gurtes immer darauf, dass der Reflektorstreifen außen ist.



Vorsicht


- Achten Sie darauf, dass der Rückengurt zu jeder Zeit vollständig in die Halterung eingesteckt ist. Es kann sonst zu schwerwiegenden Verletzungen kommen oder es können Beschädigungen am Rollator entstehen.
- Das maximale Nutzergewicht darf nicht mehr als 120 kg betragen.

Längeneinstellung des Rückengurtes

Der Rückengurt wird standardmäßig in der längstmöglichen Einstellung geliefert. Wenn Sie den Gurt gerne kürzer hätten, verstellen Sie die Befestigungsschiene auf einer oder beiden Seiten. Nehmen Sie hierzu den Gurt aus der Halterung des Rollators und legen ihn vor sich hin. Sie benötigen hierfür zwei Schlitzschraubenzieher.



1. Alle drei Schrauben mit einem Schraubenzieher lösen. Den zweiten Schraubenzieher von außen immer dagegenhalten. Schrauben herausnehmen und beiseite legen.

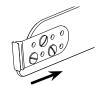

 Befestigungsschiene am Rückengurt nach innen versetzen, alle drei Schrauben wieder in die dafür vorgesehen Löcher im Gurt schrauben und festziehen.

Zusätzliche Einstellung des Rückengurtes

Falls die Handgriffe Ihres Rollators sehr hoch eingestellt sind, kann es sein, dass die Höhe des Rückengurtes deshalb nicht für ein angenehmes Sitzgefühl sorgt. In diesem Fall kann der Rückengurt auch mit der Sichtaussparung nach unten angebracht werden. Nehmen Sie hierzu den Gurt aus der Halterung des Rollators und legen ihn vor sich hin. Sie benötigen hierfür zwei Schlitzschraubenzieher. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsschiene auf der Innenseite des Gurtes befestigt wird.



 Alle drei Schrauben mit einem Schraubenzieher lösen. Den zweiten Schraubenzieher von außen immer dagegenhalten. Schrauben und Befestigungsschiene beiseite legen.



 Den Gurt um 180 Grad drehen. Die Befestigungsschiene auf der Innenseite des Gurtes an der für sie richtigen Länge positionieren. Die drei Schrauben wieder in die dafür vorgesehen Löcher im Gurt schrauben und festziehen.

Informationen entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. Technische Zeichnungen und Fotos können von der Realität abweichen. ©2023 Saljol GmbH: alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Firma Saljol GmbH gestattet.



Saljol back belt

for Saljol Carbon Rollator and Allround Rollator

Instruction manual

Manufacturer: Saljol GmbH

Frauenstraße 32 D-82216 Maisach

Phone: +49 (0)8141 317740 Fax: +49 (0)8141 3177411

Mail: hallo@saljol.de Web: www.saljol.de/en

Article number: 4058789013595

Product overview

- 1 Reflective stripes
- 2 Recess for better visibility of the floor in front of you
- 3 Breathable mesh lining
- 4 Fastening rail
- 5 Screws for length adjustment



Mounting



Insert the two fastening rails of the back strap into the holders on the back of the handles of your Saljol Carbon/Allround Rollator.

When fitting the back belt, always make sure that the reflective strip is on the outside.



Caution!


- Make sure that the back strap is fully inserted into the holder at all times. Serious injuries may otherwise occur or damage may be caused to the rollator.
- The maximum user weight must not exceed 120 kg.

Length adjustment of the back strap

The back strap is delivered as standard with the longest possible adjustment. If you would like the strap to be shorter, adjust the fastening rail on one or both sides. To do this, take the strap out of the rollator's holders and place it in front of you. You will need two slotted screwdrivers for this.



 Loosen all three screws with a screwdriver. Always hold the second screwdriver against it from the other side. Remove the screws and put them aside.

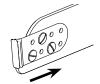

Move the fastening rail on the back strap inwards, screw all three screws back into the holes provided in the strap and tighten.

Additional adjustment of the back belt

If the handles of your rollator are set very high, the height of the back strap may therefore not provide a comfortable sitting feeling. In this case, the back strap can also be fitted with the opening recess facing downwards. To do this, take the strap out of the rollator's holders and place it in front of you. You will need two slotted screwdrivers for this. Make sure that the fastening rail is attached to the inside of the belt.



 Loosen all three screws with a screwdriver. Always hold the second screwdriver against it from the other side. Remove the screws and fastening rail and put them aside.



 Turn the belt 180 degrees, reposition the fastening rail on the inside of the belt to the correct length for you and screw all three screws back into the holes provided in the strap and tighten.

Information correct at time of printing. Technical specifications are subject to change without notice. Technical drawings and photos may differ from reality. ©2023 Saljol GmbH: all rights reserved. Reprints, including excerpts, are only permitted with the permission of Saljol GmbH.

