


Zubehör für den Rollz Motion Rhythm

Regenschirm

Bei Regen bleiben Sie, unter dem Regenschirm der fest am Rahmen befestigt ist, trocken. Dadurch können Sie den Rollator mit beiden Händen benutzen. Er dient auch als Sonnenschirm.

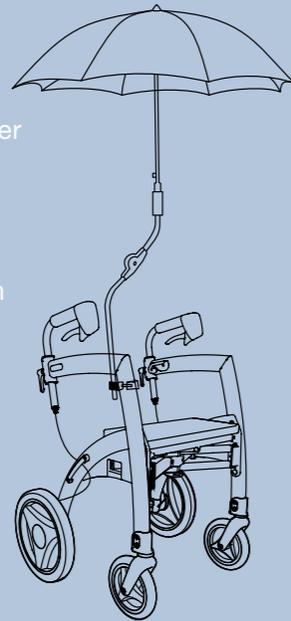

Rollstuhl-Paket

Mit dem Rollstuhlpaket lässt sich der Rollz Motion Rhythm unterwegs in einen Schieberollstuhl verwandeln. Dieses Zubehörteil ermöglicht es, gemeinsam weitere Strecken zu gehen, während Sie sich im Rollstuhl ausruhen.



Widerstandsbremsen

Der Rollz Motion Rhythm kann mit Widerstandsbremsen ausgestattet werden, deren Bremsintensität leicht einstellbar ist. Die Bremskraft kann auf Null gesetzt werden, wenn der Rollz Motion Rhythm als Rollstuhl verwendet wird.



rollz motion
rhythm

 **SALJOL**
Spaß am Leben!


Importeur: Saljol GmbH
Frauenstr. 32 | 82216 Maisach
Tel. +49 (0)8141 317740
hallo@saljol.de | www.saljol.de



Stabiler Rollator mit drei sensorischen Reizen

Der Rollz Motion Rhythm für Parkinson-Patienten oder für Nutzer mit einem gestörten Gangbild

REIZE
| Visuell
Taktile
Akustisch

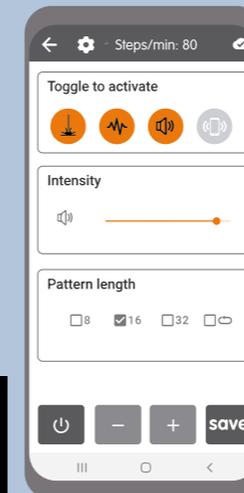

rollz®
bringt Sie weiter



Rollz Motion Rhythm gibt den Ton an

Der Rollz Motion Rhythm wurde für Menschen mit einem gestörtem Gangbild oder Blockaden beim Gehen (Freezing) durch Morbus Parkinson entwickelt. Dieser sehr stabile Rollator unterstützt, mit drei Reizen, das Beginnen einer rhythmischen Gehbewegung.

Drei Reize

Dieser Parkinson Rollator bietet verschiedene Signale, um aus dem Freezing herauszukommen: eine Laserlinie auf dem Boden, ein Metronom mit zwei Tönen und eine Vibration in den Griffen. Es ist möglich, aber nicht erforderlich, diese drei zu kombinieren.



Den Rhythmus starten

Der Laser, die Vibration und die Töne zeigen den gewünschten Geh-Rhythmus an. Die persönlichen Vorlieben und das Tempo können über das Modul am Rollator eingestellt werden. Der Geh-Rhythmus startet durch Drücken einer Taste im Griff.



rollz motion rhythm

Mit Laserlicht, Vibrationen und Tonsignalen

REIZE
Sichtbar
Spürbar
Hörbar

Schneller oder langsamer

Das Tempo aller Reize kann leicht erhöht werden, damit der Benutzer etwas schneller spaziert, oder etwas langsamer, um die Bewegungen flüssiger zu machen.



Zwei Töne

Eine Variation der Tonhöhe des Metronoms verhindert eine Gewöhnung und hält den Benutzer fokussiert. Sie können diese Töne auch über das Smartphone erklingen lassen.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	All	
Laser	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vibration	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
High note	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Low note	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Smartphone-App

Mit der dazugehörigen App auf dem Smartphone werden Schallintensität, Tonhöhe, Musterdauer und Rhythmus der Reize eingestellt: 8x, 16x, 32x oder kontinuierlich. Das Smartphone selbst kann über die App auch rhythmisch vibrieren.

