



# AR

Allround Rollator





Für mehr Spaß am Leben:  
Premium Qualität mit Vollausrüstung

## Der Saljol Allround Rollator

### Premium Qualität mit Vollausrüstung

Das Gesamtpaket besteht aus Premium Allround Rollator, Rückengurt, Netztasche, Stockhalter, Klingel und LED-Licht.

Der Rückengurt lässt sich leicht anbringen und ist größenverstellbar. Dank der breiten, hohen Anlagefläche sitzen Sie deutlich bequemer. Die große Aussparung ermöglicht Ihnen freie Sicht auf den Gehweg, ein Reflektorstreifen erhöht die Sichtbarkeit. Die stabile Tasche können Sie mit einer Hand abnehmen. Für bessere Sicht- und Hörbarkeit im Straßenverkehr sorgen das an der Tasche angebrachte LED-Licht und die Klingel am Griff.

### Sicherheit, die Sie spüren – „handschmiegsame“ Kork-TPE-Griffe mit Armlehne

Die Schiebegriffe sind aus hautfreundlichem Kork-TPE, das die Nachhaltigkeit, das geringe Gewicht und die Haptik von Naturkork mit der Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit von Kunststoffen verbindet. Sie bieten Ihnen dank ergonomischer Flügelform sicheren Halt und verhindern ein Abrutschen der Hände. Das stoßdämpfende und wärmespeichernde Material reduziert Schmerzen und fördert die Beweglichkeit Ihrer Hände und Finger, besonders bei sensibler Haut. Die rutschhemmenden, schnelltrocknenden Eigenschaften gewährleisten auch bei Nässe sicheren Komfort. Die Kork-TPE-Armlehne macht das Ablegen der Arme im Sitzen sehr angenehm. Da Kork ein natürlicher Bestandteil des Griffes ist, kann sich durch die Reaktion des Naturmaterials mit den Handflächen eine typische dunkle Patina bilden. Die Griffe sind trotzdem leicht zu reinigen und bleiben sauber.







### **Korkfarbene Designelemente führen durch die Funktionen der Saljol Rollatoren**

Das Design erleichtert Ihnen dank korkfarbener, brauner Komponenten die intuitive Bedienung. Alle verstellbaren Elemente erkennen Sie dadurch sofort und ermöglichen Ihnen eine schnelle, sichere Anpassung an Ihren Bedarf. Die durchdachte Farbgestaltung sorgt für Übersichtlichkeit und maximalen Komfort im Alltag.



### **Sicherheit durch Sichtbarkeit**

Über 30 Reflektoren und Reflektorstreifen am Rollator sorgen dafür, dass Sie bei schlechten Lichtverhältnissen gut erkennbar sind. Ob im Straßenverkehr oder bei Freizeitaktivitäten – die reflektierenden Elemente machen Sie mit Ihrem Rollator besser für andere Verkehrsteilnehmer erkennbar.



### **Optionales Einhand-Bremssystem – mit einer oder beiden Händen bremsen für maximale Kontrolle ohne Aufpreis (auf Bestellung)**

Der Umbau zur Einhand-Simultanbremse ermöglicht es Ihnen, den Rollator mit nur einer Hand komplett zu bremsen. Dieses Bremssystem ist besonders hilfreich bei altersbedingtem Kraftverlust oder einseitigen Einschränkungen, wie nach einem Schlaganfall, bei Parkinson oder Frakturen und ermöglicht Ihnen die einhändige Bedienung beider Bremsen mit geringem Kraftaufwand. Das dazu nötige, längere Bowdenzugkabel schicken wir Ihnen auf Anfrage kostenlos zu.



### **Kompakt faltbar – ideal für den einfachen Transport**

Den Rollator können Sie mit einem Handgriff einfach und schnell auf nur 21 cm Breite falten. Im gefalteten Zustand kann er mit einem Haken sicher arretiert werden und lässt sich kompakt und stabil verladen. Dank des leichten Gewichts und der schmalen Maße transportieren Sie ihn problemlos im Auto oder auf Reisen.



### **Höchste Qualität bis ins kleinste Detail – Sie fühlen es!**

Die leichtgängigen Handbremsen ermöglichen Ihnen ein kräftesparendes Bremsen und sind auch für kleinere Hände einfach zu bedienen. Die ergonomische Form und die Kork-TPE-Verkleidung geben sicheren, komfortablen Halt. Betätigen Sie die Feststellbremse, signalisiert Ihnen ein deutliches Klickgeräusch, dass der Rollator sicher steht – ideal zum Hinsetzen oder Befüllen der Tasche.





#### **Extra groß, stoßdämpfend und griffig – Räder für jede Situation**

Die Reifen mit besonders griffigem Profil geben Ihnen Stabilität und Komfort auf unebenem Untergrund wie Kopfsteinpflaster, Feld- oder Waldwegen. Darüber hinaus verhindern die 250 mm großen All-Terrain-Vorderräder ein Blockieren der Räder bei kleinen Unebenheiten wie Wurzeln oder Schlaglöchern. So reduzieren sie die Sturzgefahr und ermöglichen ein sicheres Vorankommen – ideal, wenn Ihr Gleichgewichtssinn eingeschränkt oder Ihre Aufmerksamkeit vermindert ist. Das stoßdämpfende PU-Vollgummi-Material wirkt fast wie eine Luftbereifung, nur pannensicher. Es schont zudem Hände, Ellbogen und Schultern, was bei rheumatischen oder neurologischen Erkrankungen spürbare Erleichterung bringt.



#### **Sicher und mühelos Hindernisse überwinden mit rutschhemmender Ankipphilfe**

Die rutschhemmenden, gummierten Ankipphilfen befinden sich hinten am Rahmen auf Höhe der Hinterräder. Sie erleichtern das Überwinden von Bordsteinen, Schwellen und Unebenheiten. Die flache Trittpläche sorgt für sicheren Halt, reduziert Sturzgefahr und bietet zusätzliche Stabilität.





### **Sicherer Halt für Ihren Gehstock – jederzeit griffbereit**

Der universelle Stockhalter passt sich flexibel an verschiedene Gehhilfen und Gehstöcke an. Mit einem einzigartigen Arretierungssystem bleibt der Stock sicher fixiert und stets griffbereit. Durch ein Klickgeräusch hören Sie, dass der Stock sicher befestigt ist.



### **Ihre Stütze für unterwegs – der leichte und faltbare Gehstock**

Der Gehstock ist mit nur 278 g Gewicht federleicht und dennoch äußerst belastbar. Gefertigt aus hochwertigem Carbon, besticht er durch beste Qualität und einen edlen Look. Zudem ist er höhenverstellbar, faltbar und dabei stets stabil – die perfekte Kombination aus Funktionalität und Eleganz. Er ist direkt über [www.saljol.de](http://www.saljol.de), unser Serviceteam oder bei einem Sanitätshaus in Ihrer Nähe erhältlich.



### **Das passende Produkt für Sie – erhältlich für jeden Bedarf**

Saljol Premium Rollatoren sind in zwei Größen, edlen Farben und zusätzlich mit breiterer Sitzfläche (52 cm) und höherer Tragkraft (180 kg) erhältlich. So haben Sie die Möglichkeit, genau die Lösung zu wählen, die optimal zu Ihren Bedürfnissen und Ihrem persönlichen Geschmack passt. Ob für mehr Komfort, Funktionalität oder Stil – Sie finden die perfekte Kombination, die Ihren Anforderungen gerecht wird.



### **Nachrüstbare Schleifbremse – Ihr Rollator kann sich nach Ihren Bedürfnissen richten**

Höchste Sicherheit und Kontrolle beim Gehen stehen bei Ihnen an oberster Stelle? Die nachrüstbare Schleifbremse (Zubehör für Ihren AR) bietet Ihnen genau das. Der Rollwiderstand der Hinterräder lässt sich individuell einstellen, bremst sanft ohne zu blockieren (ABS) und verhindert, dass Ihr Rollator schneller rollt als Sie wollen – besonders hilfreich bei Gefällen. Die Bremse unterstützt Sie optimal bei Gangunsicherheiten, kann falschen Richtungsdrall ausgleichen und reduziert dadurch die Sturzgefahr. Einmal richtig eingestellt (de)aktivieren Sie sie mit dem Fuß.







Deutsche Ingenieurskunst aus Bayern.

**German Design**



### **Großer Luxus, der erschwinglich bleibt**

Saljol Rollatoren bieten Ihnen den perfekten Mix aus Funktionalität, Qualität und einem Hauch von Luxus. Deutsche Ingenieurskunst verbindet hochwertige Funktionen mit Komfort, die Ihren Alltag erleichtern – und das ganze Paket zu einem insgesamt fairen Preis.



### **Rundum gut betreut – für Ihre Mobilität und Sicherheit**

Unsere Physiotherapeutin Katharina unterstützt Sie in allen Bereichen, in denen physiotherapeutisches Fachwissen gefragt ist. Unser hilfsbereiter Beratungsservice steht Ihnen jederzeit zur Seite – sei es im Sanitätshaus oder direkt bei uns. Bei Fragen oder Unsicherheiten rund um Ihren Saljol Allround Rollator bieten wir Ihnen die Unterstützung, die Sie benötigen, um das Beste aus Ihrem Rollator herauszuholen.



### **Training rund um Ihren Rollator**

Um medizinische Nebenwirkungen bei der Nutzung unserer Rollatoren zu vermeiden, haben wir Rollastic erfunden. Eine maßgeschneiderte Gymnastik für Rollatornutzer, die bei regelmäßiger Ausführung Beweglichkeit und Kraft bewahren kann. Spezielle Videos liefern wir mit dem Rollator.

Für Ihre Sicherheit im Straßenverkehr haben wir das Verkehrssicherheitstraining „Mobil mit Rollator“ entwickelt. Hilfreiche Tipps und Tricks finden Sie unter [www.mobilmitrollator.de](http://www.mobilmitrollator.de).



### **Peter: „Ich habe meine Mobilität zurückgewonnen!“**

„Durch den Allround Rollator habe ich nach meinem Schlaganfall einen Großteil meiner Mobilität zurückgewonnen. Die fehlende Mobilität in der linken Hand ist bei mir ein Problem und mit der Feinmotorik tue ich mir unheimlich schwer. Da hilft mir die Einhandbremse des Allround Rollators enorm. Nach dem Schlaganfall bin ich als vollkommen hilfloser Mensch heimgekommen und dachte, so etwas wie Reisen geht nicht mehr. Falsch! Ein bisschen was geht immer! Man muss es einfach nur probieren.“





<b>Allround Rollator</b> inklusive Rückengurt, Netztasche, Stockhalter, LED-Licht und Klingel	<b>AR54</b> 499,00 €	<b>AR62</b> 499,00 €	<b>AR62W</b> 599,00 € <small>Nur in Barolo Red erhältlich</small>
Empfohlen für Körpergröße	145–170 cm	160–200 cm	160–200 cm
Maximales Nutzergewicht	150 kg	150 kg	180 kg
Gesamtgewicht ohne Zubehör	6,3 kg	6,4 kg	6,4 kg
Maximale Zuladung der Netztasche	5 kg	5 kg	5 kg
Breite offen/geschlossen	61/21 cm	61/21 cm	68/21 cm
Sitzbreite	46 cm	46 cm	52 cm
Sitzhöhe	54 cm	62 cm	62 cm
Griffhöhe (einstellbar)	76–88 cm	81–103 cm	81–100 cm
Hilfsmittelnummer	10.50.04.1261	10.50.04.1261	beantragt

### Allround Rollator – Bestandteile der Vollausrüstung



Rückengurt  
49,00 €



LED-Licht  
10,00 €



Klingel  
19,00 €



Stockhalter  
19,00 €



Pearl Grey

### Allround Rollator – weiteres Zubehör



Schleifbremse  
39,00 €

Abb. zeigt CR




Transporttasche  
89,00 €



Fester Sitz  
59,00 €



Holztablett  
mit Filzauflage  
69,00 €

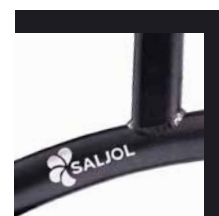

Magic Black



Schirm  
karamell  
89,00 €



Schirm  
schwarz  
89,00 €



Carbon  
Gehstock  
99,00 €



Bremskabel für  
den Umbau zur  
Einhandbremse  
0,00 €



Forest Green



Barolo Red