

Aktiv-Sitzkissen
für Extra*
Kubivent inside.

mit
KUBIVENT◊
inside

Gesund Sitzen mit KUBIVENT®

KUBIVENT inside Kissen sind Teil der Optimierungen die SALJOL für Rollstühle. Das Kissen ist ein hochwertiges Produkt von KUBIVENT dem Spezialisten mit 60 Jahren Erfahrung für richtiges Sitzen und Liegen. Es steht für Gesundheit, hohe Qualität und durchdachten Komfort.

Es integriert somit das Wissen des Kissenexperten KUBIVENT in ein SALJOL-Produkt, das aus einem herkömmlichen Hilfsmittel ein wohnliches Möbel macht.

KUBIVENT inside Kissen plus
Schutzbezug mit zweiseitigem
Reißverschluss

In drei Größen erhältlich

39 x 44 x 6 cm

42 x 44 x 6 cm

45 x 44 x 6 cm

Made
in
Germany



Höhe
6 cm



 **SALJOL**
immer weiter.

SALJOL GmbH | Frauenstr. 32
82216 Maisach | Deutschland
www.saljol.de | hallo@saljol.de
Tel. 08141 317 740 | Fax 08141 317 74 11

Komfortmatratze Bequema^{*}

Erhol dich gut.

mit
KUBIVENT
inside

Gesunde Erholung mit Bequema

Die Saljol Kaltschaummatratze steht für hohen Komfort und Qualität aus Deutschland. Sie verbindet die Vorteile drei ausgewählter Schaumstoffe für einen gesunden Schlaf und ist so aufeinander abgestimmt, dass Sie ohne besondere Eingewöhnungseffekte von Anfang an entspannt auf ihr schlafen werden. Auch beim Wechsel der Liegeposition passt sich der Kaltschaum sofort an und gibt dort nach, wo höheres Gewicht einwirkt. Die besten Bedingungen für einen erholsamen Schlaf.

Empfohlen bei

- Normalschläfer, ohne besondere Schlafprobleme
- Rückenschmerzen
- Nackenschmerzen
- Kopfschmerzen durch Verspannungen

Bezug

Die Matratze ist mit einem abnehmbaren, haut-sympathischem Frottee-Bezug ausgestattet, der bei 60°C waschbar ist.

Besondere Hinweise

Beim Einlegen ins Bett sollte darauf geachtet werden, dass die Liegefläche, gekennzeichnet mit „Oberseite der Matratze“, nach oben weist.

Reinigung

Mit dem Reinigen der Matratze ist in der Regel der Bezug gemeint. Der Bezug kann mit einem feuchten und/oder mit Desinfektionsmittel getränktem Tuch abge-

wischt sowie in der Waschmaschine bei 60°C gewaschen werden. Hierzu beachten Sie bitte das entsprechende Waschetikett am Bezug.

Der Matratzenkern kann mit einem leicht angefeuchteten Tuch abgewischt werden. Bei allen Reinigungsverfahren dürfen kein Äthylenoxid, Formaldehyd und darf keine Phenole verwendet werden.

Technische Daten

Maße: 200x90x15 cm

Weitere Größen auf Anfrage.

Einsatzbereich: 0-130 kg

Aufbau:

2 cm Weichschaum-Oberschicht

(Raumgewicht 35 kg / m³ Stauchhärte 1,8 kPa)


4 cm Kaltschaum-Noppenauflage

(Raumgewicht 45 kg / m³ Stauchhärte 3,5 kPa)

9 cm Kaltschaum-Unterschicht

(Raumgewicht 40 kg / m³ Stauchhärte 3,0 kPa)

Garantie: 3 Jahre

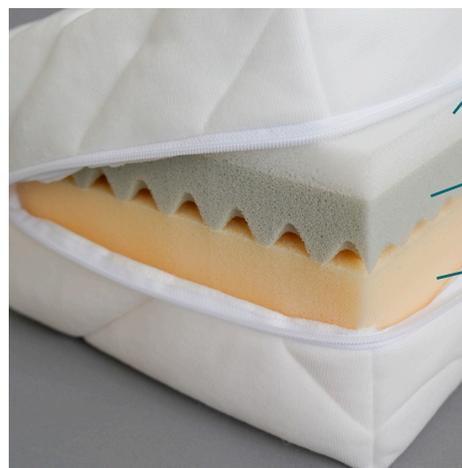

Made
in
Germany



Höhe
15cm