

rollz®

bringt Sie weiter



Ergonomisch und stilvoll designte Rollatoren

Das Leben in vollen Zügen genießen, das ist es, worum es bei Rollz geht. Sei es für einen Spaziergang im Park, einen Museumsbesuch, eine Urlaubsreise oder einen Einkaufsnachmittag. Unsere ergonomisch und stilvoll gestalteten Rollatoren bringen Sie weiter und unterstützen gleichzeitig ein aktives und unabhängiges Leben.



Abenteurer genießen mit Rollz Motion²

Der 2in1 Rollator und Rollstuhl

Der Rollz Motion² ist perfekt für alle, die ihr Leben aktiv gestalten möchten, aber sich Sorgen machen, wie weit sie gehen können. Mit diesem Hybrid, der zwei Hilfsmittel in einem vereint, sind Sie für jede Situation vorbereitet. Sie können den Rollator mit wenigen Handgriffen in einen Schieberollstuhl verwandeln und die Reise fortsetzen.



rollz motion

Rollz Motion² Merkmale

Stilvoll

Preisgekrönter holländischer Design-Rollator und Rollstuhl in einem, um stilvoll auszugehen.

Sicher

Innovative Trommelbremsen, geeignet für nasse und trockene Bedingungen.

Bequem

Ruhen Sie sich auf dem gepolsterten Sitz aus oder verwandeln Sie den Rollator in einen Rollstuhl.

Ankipphilfe

Überwinden Sie Türschwellen und Bordsteine einfach mit der Ankipphilfe.

Stabil

Ergonomische, höhenverstellbare Handgriffe unterstützen das aufrechte und sichere Gehen.

Kompakt

Der Rollz Motion² lässt sich leicht zu einem kompakten Paket zusammenfolden und passt so in fast jedes Auto.

Komfortabel

Die großen Hinterräder mit weichen Reifen und Schaumstoffgriffen sorgen für bequemes Gehen.

Manövrierfähig

Leichtes Lenken und einfaches Bewegen mit den wendigen Vorderrädern.



Einfach umwandeln

Mit einem Handgriff können Sie den Rollz Motion² Rollator in einen Rollstuhl verwandeln und wieder zurück. Das gibt Ihnen das Selbstvertrauen, weiter zu gehen und sich unterwegs auszuruhen, während Sie einen Tag mit Ihrer Familie oder Freunden genießen.

Der **Rollz Motion²** ist in vier Farben erhältlich: Pebble white, Dark purple, Matt black und Island blue.

Der **Rollz Motion² Small** ist in den Farben Island blue und Matt black erhältlich.



rollz motion

Sehen Sie den Rollz Motion in Aktion:




“Jetzt traue ich mich, auch längere Strecken mit meinem Rollator zu gehen. Wenn ich müde werde, kann ich mich einfach im Rollstuhl ausruhen.”

Reibungslose und sichere Fahrt auf unbefestigten Wegen

All-Terrain-Rollator und Rollstuhl in einem

Dank spezieller Bereifung bietet der Rollz Motion Performance eine komfortable Fahrt, auch auf holprigen Straßen. Die extra dicke Polsterung der Armlehnen und die ergonomisch geformten Griffe tragen zum Komfort bei. Außerdem sind die Fußstützen in der Höhe verstellbar.

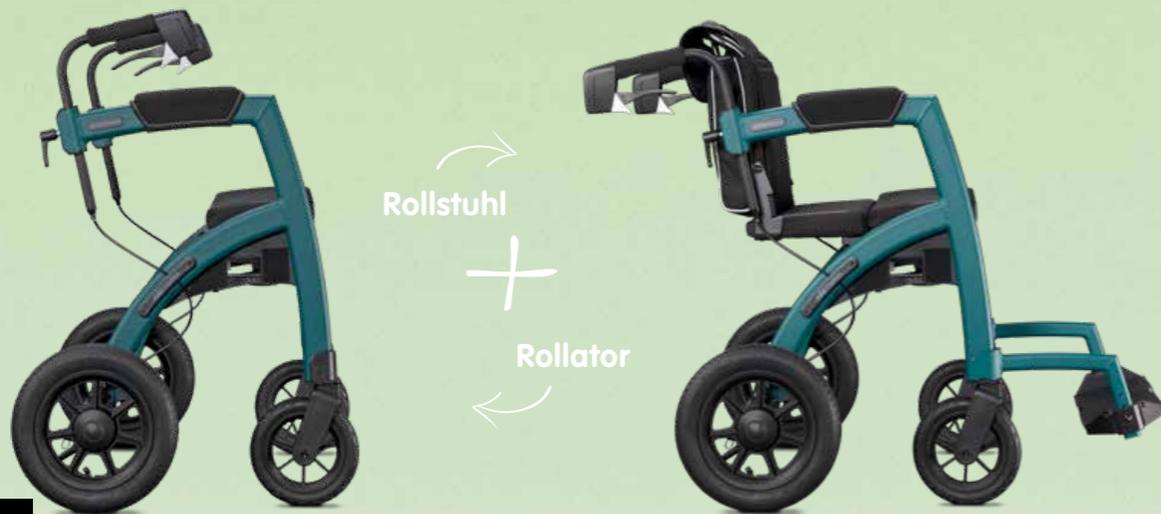

rolz motion performance

Rollz Motion Performance Merkmale

Stillvolles 2in1

Holländisches Design zum Ausgehen mit Stil. Der Rollator lässt sich in Sekundenschnelle zum Rollstuhl verwandeln.

Ergonomische Griffe

Ergonomisch geformte und weiche Griffe für den optimalen Halt.

Ein Blickfang

Moderne Mattierung in der neuen Farbe Jungle green.

Sichtbar

Sichtbar im Dunkeln dank zahlreicher reflektierender Elemente.

Weich

Armlehnen mit extra dicker Schaumstoffpolsterung erhöhen den Komfort.

Fester Sitz

Kissen in Keilform für eine bessere Sitzposition.

Reifen

Hinten Luftreifen für angenehme Fahrten auf holprigen Straßen und vorne zwei schaumstoffgefüllte Reifen für zusätzliche Stoßdämpfung



Stabil

Aufrecht und sicher gehen, unterstützt durch robustes Design.

All-Terrain-Version



rollz motion
performance

Spezifikationen

	Rollz Motion ²	Rollz Motion ² Small	Rollz Motion Performance
Rollator Gewicht	11,6 kg	11,6 kg	11,4 kg
Gewicht Rollstuhlpaket	3,4 kg	3,4 kg	3,4 kg
Maximale Belastung	125 kg	125 kg	125 kg
Körpergröße	1,60–1,90 m	1,50–1,85 m	1,60–1,90 m
Sitzhöhe	55 cm	50 cm	55 cm
Griffhöhenbereich	87–98 cm	82–94 cm	86–98 cm
Sitzgröße Rollator	20 x 45 cm	20 x 45 cm	20 x 45 cm
Sitzgröße Rollstuhl	42 x 45 cm	42 x 45 cm	42 x 45 cm
Gesamtbreite	67 cm	67 cm	67 cm
Gesamtlänge	63 cm	63 cm	63 cm
Breite gefaltet	31 cm	31 cm	29 cm
Durchmesser Vorderräder	8 Zoll	8 Zoll	Reifen 8 x 1¼ Zoll
Durchmesser Hinterräder	12 Zoll	12 Zoll	Reifen 12½ x 2¼ Zoll

Garantie: 5 Jahre auf den Rahmen und 2 Jahre auf andere Teile mit Ausnahme von normalem Verschleiß.





rollz motion
rhythm

Parkinson Rollator mit individuell einstellbaren Impulsen

Der Rollz Motion Rhythm ist entwickelt für Menschen mit einem gestörten Gangbild oder für Menschen, die unter Freeze-Episoden leiden.

Dieser sehr stabile Rollator regt den Beginn eines rhythmischen Gangbildes an mit Hilfe von drei Impulsen: Laser, Ton und Vibration.

Sehen Sie den Rollz Motion Rhythm in Aktion:



Gewinnen Sie Ihren Gehrhythmus zurück mit Rollz Motion Rhythm

Dieser vielseitige Rollator kann von Physiotherapeuten und anderen professionellen Fachleuten empfohlen und verwendet werden, um Patienten mit einer neurologischen Gangstörung zu unterstützen.

Drie Reize

Dieser Parkinson Rollator gibt mehrere Reize, um aus einem Stillstand herauszutreten: eine Laserlinie auf dem Boden, Vibration in den Handgriffen und ein Metronom mit zwei verschiedenen Tönen. Die drei Impulse können beliebig kombiniert werden.



Starten Sie das Muster

Der Laser, die Vibration und der Ton zeigen den gewünschten Gehrhythmus an. Sie wählen die Impulse aus und stellen das Tempo im Modul am Rollator ein. Durch Drücken der Taste am Handgriff startet das rhythmische Muster.




rollz motion rhythm

Einfache Einstellung und Aktivierung

REIZE | Sehen
Fühlen
Hören

Beschleunigen oder Verlangsamen

Das Tempo der Impulse kann leicht beschleunigt werden, um den Benutzer zu einem schnelleren Gangrhythmus anzuregen. Oder das Tempo kann langsamer eingestellt werden, für flüssigere Bewegungen.

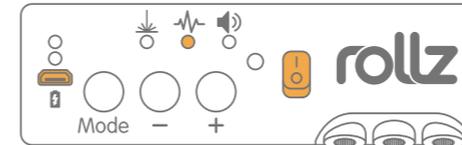

Zwei Töne

Variation in der Tonhöhe des Metronoms verhindert eine Gewöhnung. So bleibt der Anwender konzentriert. Diese Impulse können auch über das Smartphone abgespielt und eingestellt werden.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	All
Laser	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vibration	<input checked="" type="checkbox"/>																
hoher Ton	<input type="checkbox"/>																
tiefer Ton	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Smartphone-App

Vibration, Tonhöhe und Tonintensität lassen sich in der entsprechenden App auf dem Smartphone einstellen. Über die App kann die Musterlänge der Impulse eingestellt werden: 8x, 16x, 32x oder pausenlos.



“Ich war auf der Suche nach einem Rollator, der nicht wie einer aussieht. Einkaufen fühlt sich jetzt einfach gut an, da dieser Rollator so leicht zu manövrieren ist!”



rollz flex

Unterwegs mit dem Rollz Flex²

Design-Rollator mit großer Tasche

Auf den ersten Blick sieht es nicht nach einer Gehhilfe aus. Die Absicht der Designer war, ein ansprechendes Design für den Aufenthalt im Freien zu schaffen.

Dieser Rollator lässt sich leicht manövrieren und Sie können stabil und bequem gehen, während die Tasche Ihre Einkäufe trägt.



Sehen Sie den Rollz Flex in Aktion:



Manövrierfähig

Sie können überall leicht manövrieren, auch zwischen Hindernissen. Die Vorder- und Hinterräder sind nahe beieinander, was für einen sehr kleinen Wenderadius sorgt. So können Sie auch auf engem Raum problemlos wenden.

Wenn Sie eine Kurve fahren, kommen Ihnen die Räder nicht in die Quere. Sie können leicht zur Seite treten und etwas aus einem Schrank oder Regal nehmen. Der Rollz Flex² funktioniert auch dann noch, wenn die Tasche voll beladen ist.

Mit Leichtigkeit können Sie die Bordsteinkanten mit Hilfe der Ankipphilfe überwinden.



rollz flex

Rollz Flex² Merkmale

Stilvoll

Leichter Rollator mit dem Look eines Designer-Shoppers.

Flexibel

Leicht verstellbare Handgriffe für verschiedene Höhen.

Praktisch

Die große wasserfeste Tasche kann bis zu 20 kg/25 Liter tragen. Inklusive herausnehmbarem Innenbeutel.

Komfortabel

Die großen Hinterräder mit weichen Reifen und die Schaumstoffgriffe sorgen für bequemes Gehen.

Bequem

Ruhen Sie sich auf dem Kunstledersitz aus, während die Handgriffstange Ihnen als Rückenlehne dient.

Leichte Hilfe

Überfahren Sie Türschwellen und Bordsteinkanten leicht mit der Ankipphilfe auch mit voll beladener Tasche.

Manövrierfähig

Leichte Lenkung und leichte Bewegung dank des kleinen Wendekreises.





rollz flex

Spezifikationen

	Rollz Flex
Rollator Gewicht	7,7 kg
Körpergröße	1,55–1,95 m
Sitzhöhe	62 cm
Sitzbreite	44 cm
Maximale Belastung	125 kg
Gesamtbreite	62,3 cm
Gesamtlänge	60 cm
Breite gefaltet	33 cm
Griffhöhenbereich	80–100 cm
Maximale Tasche Inhalt	20 kg/25 l
Durchmesser Räder	8 Zoll

Der **Rollz Flex²** ist erhältlich in vier Rahmenfarben: Matt black, Pebble white, Dark purple und Jungle green. Die Tasche ist aus nachhaltigem und wasserabweisendem Material hergestellt und ist in der Farbe Grau erhältlich.

Garantie: 5 Jahre auf den Rahmen und 2 Jahre auf andere Teile mit Ausnahme von normaler Abnutzung und Verschleiß.





Rollz Motion Transportschutzhülle

Durch das einzigartige Design des Transportschutzes werden sowohl der Rollz Motion als auch das Rollstuhlpaket in einem kompakten Paket untergebracht. Der Transportschutz bewahrt den Rollz Motion vor Beschädigungen.



Rollz Motion Einkaufstasche

Diese stilvolle und funktionelle Einkaufstasche kann auf den Rollz Motion Rahmen montiert werden. Sie können Ihre Einkäufe direkt in den Shopper packen und mitnehmen, so dass Sie keine Einkaufstasche mit sich herumtragen müssen.



Rollz Motion Becherhalter

Der Becherhalter ist sehr einfach zu bedienen. Dank des Schiebesystems kann die Halterung schnell in die gewünschte Position gebracht werden, so dass Sie eine Flasche oder einen Becher mitnehmen können..



Rollz Motion 3in1 Rollstuhlpaket Halter

Mit diesen Haltern können Sie Ihr Rollstuhlpaket auch über den Sitz hängen. So haben Sie mehr Platz zum Gehen und mehr Bewegungsfreiheit. Ein Gehstock- und ein Taschenhalter sind integriert.



Rollz Motion und Rollz Flex Schirme

Dieser Regenschirm schützt Sie vor Regen und Sonnenschein. Er wird am Gestell befestigt, so dass Sie sich mit beiden Händen auf den Rollator stützen können.

Rollz Motion Rückengurt

Sie sind allein unterwegs und haben das Rollstuhlpaket zu Hause? Dann können Sie sich am weichen Rückengurt anlehnen und sich erholen.



Rollz Motion Sicherheitsgurt

Mit dem Sicherheitsgurt schnallen Sie sich im Rollstuhl an – das sorgt für zusätzliche Sicherheit. Einfach am Rollstuhlpaket anbringen und auf die gewünschte Länge einstellen.



Rollz Flex Gehstockhalter

Der Stockhalter wird am Lenker befestigt und bleibt dort. Das entsprechende Teil ist so konzipiert, dass es für fast jeden Gehstock passt.



Rollz Flex Einkaufshaken

Wenn Sie einkaufen gehen, bietet dieses Hakenset die Möglichkeit, eine weitere Einkaufstasche mitzunehmen.



Rollz Motion und Rollz Flex Tablett

Mit diesem Bambustablett können Sie ganz einfach eine Tasse Kaffee oder ein Buch überall im Haus mit hinnehmen.



Rollz International BV
www.rollz.de

rollz®



rollzint



RollzInternational



rollzint



RollzInternational



Importeur: Saljol GmbH
Frauenstr. 32 | 82216 Maisach
Tel. +49 (0)8141 317740
hallo@saljol.de | www.saljol.de

